

音波歯ブラシ

保証書付
取扱説明書

型番/品番

HB-C582-K/00-8340
HB-C582-P/00-8341
HB-C582-A/00-8342
HB-C582-LA/00-8343



このたびは弊社音波歯ブラシをお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をお読みのうえ、正しく安全にお使いください。この取扱説明書は、ご使用時にいつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。

保証書		
商品名	音波歯ブラシ	
型番/品番	HB-C582-K/00-8340 HB-C582-P/00-8341 HB-C582-A/00-8342 HB-C582-LA/00-8343	
★お買い上げ日	年月日	
保証期間：本体1年間（お買い上げの日から）		
お客様	ふりがな ★お名前	様
	★ご住所	〒 -
	電話	()
販売店	★住所 店名 電話	(印)

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県川口市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談センターへ

●電話料金別 ●携帯・IP・公衆電話からは

0120-963-006 048-992-2735

電話受付 平日 9:00～17:00

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するお問い合わせは 修理ご相談センターへ

●電話料金別 048-992-3970 平日 9:00～17:00

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するお問い合わせは 修理ご相談センターへ

●電話料金別 048-992-3970 平日 9:00～17:00

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

- 保証規定**
1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従つた使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
 2. 保証期間内でも次の場合は有料修理となります。
(イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、改造などによる故障及び損傷
(ロ) 買い上げ後の輸送、移動、落としによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塗装、異常電圧、水掛けなどによる故障及び損傷
 - (二) 消耗または耗耗した部品、付属品の交換
(ホ) 本書のご提示がない場合
(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文書を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります。)
(ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
(チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
 3. ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとににおいて無料修理をお約束するものです。
- ※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

安全上のご注意

ここに示してある注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の方々への危険や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。


△警告		△注意	
! 必ず守る	この表示を無視して、誤った使いかたをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。	!	この表示を無視して、誤った使いかたをすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与える可能性が想定される内容です。
!	万一本体を落とすと、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。	!	歯や歯茎に歯ブラシを強く押し当てたり、長時間同じ場所を磨かない。
!	●火災・感電の原因となります。	●歯や歯茎を傷つけたり、故障の原因になります。	●歯磨き以外の目的に使用しない。
!	●煙が出なくなるのを確認して販売店または弊社修理ご相談センターに修理をご依頼ください。	●事故やトラブルの原因になります。	●事故やトラブルの原因になります。
!	次の方は使用しない。	人以外に使用しない。	自分で意思表示ができない人に使用しない。
!	・口内の感覚が敏感な方	●事故やトラブルの原因になります。	●事故やトラブルの原因になります。
!	・口腔または歯周の手術の直後や治療中の方	自分で意思表示ができない人に使用しない。	お手入れの際、シンナー・ベンジン・アルコールは絶対に使わない。また、化粧品やハンドクリームなど油成分の付いた手で使わない。
!	・口腔内に気になる病状(治療中の歯、不安定な入れ歯など)がある方	●事故やトラブルの原因になります。	●故障・変形・変色の原因になります。
!	・歯茎からの出血が続く、または大量の出血がある方	周囲の人の不意の動作に気をつける。	●万一本体を落とすと、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
!	●傷口の悪化やけがの原因になります。	●接触によりけがをするおそれがあります。	●接触によりけがをするおそれがあります。
!	複数の人で共用しない。	使用後は電源を必ず切る。長期間使わないときは乾電池を取り外す。	●接触によりけがをするおそれがあります。
!	●病原菌に感染する原因になります。	●乾電池の消耗を抑えます。	●乾電池の消耗を抑えます。
!	お子様の手の届くところに保管しない。またお子様に単独で使用させない。		
!	●思ひぬけがを負うおそれがあります。		
!	本体を分解、修理、改造しない。		
!	●感電の原因となります。		
!	分解禁止		

乾電池を安全にお使いいただくために

液もれ、発熱、破裂などの事故を防ぐために、以下のことをお守りください。


!	警告	・火中の投入、加熱、分解をしない ・ショートさせない
!	注意	・⊕の表示どおりに入れる ・指定以外の乾電池を入れない ・使い切った乾電池はすぐに取り出す ・長期間使用しないときは乾電池を取り外しておく ・使用推奨期限内の乾電池を使用する
!	注意	●万一本体を落とすと、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。 ●接触によりけがをするおそれがあります。 ●接触によりけがをするおそれがあります。 ●乾電池の消耗を抑えます。

各部の名称

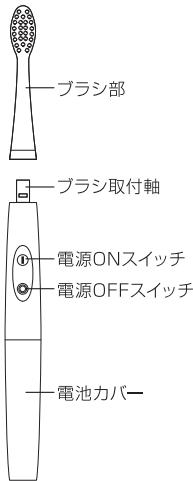

ご使用方法

- ① 電源ONスイッチを押して電源をONにします。
ブラシを歯に軽く当てるようにして1本1本
ていねいに磨いてください。
- ② 電源OFFスイッチを押して電源をOFFにします。
ブラシ部分を水洗いした後、よく水気を
切ってください。

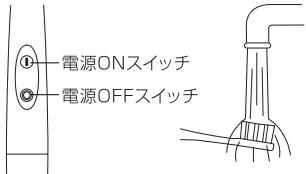


※ブラシ部分だけを水につけて洗ってください。
本体は、水がかからないようにして水にぬれ
た場合は軽くふき取ってください。

お手入れのしかた


- 必ず電源が切れた状態で行なってください。
- ① ブラシ部を本体から取り外します。
② ブラシ部を水道水で十分に洗い流します。
③ 本体が汚れた場合は、軽く水道水で洗い流します。
④ 本体及びブラシ部についた水分を拭き取り、
十分に乾かします。

汚れを拭き取る際に、シンナー・ベンジン、
アルコールは絶対に使用しないでください。
変形や変色のおそれがあります。

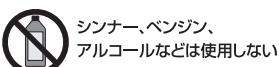

乾電池の入れかた


- ① 電池カバーを矢印の方向
に回して外します。
●浸水を防ぐため、固め
に閉まっていることがあります。
- ② 単4形アルカリ乾電池1本(別売)を
 $\oplus\ominus$ の表示どおりに正しく入れます。
●必ずアルカリ乾電池をご使用ください。
マンガン乾電池は電池容量
が小さく、本製品には不向きです。
●コイルバネのあるほうが \ominus です。
○側から先に入れてください。
- ③ 電池カバーを元どおりに
閉めます。
●しっかり奥まで電池カバーを差し込み、「○」の
位置まで確実に回して
閉めてください。隙間
があると浸水のおそれ
があります。

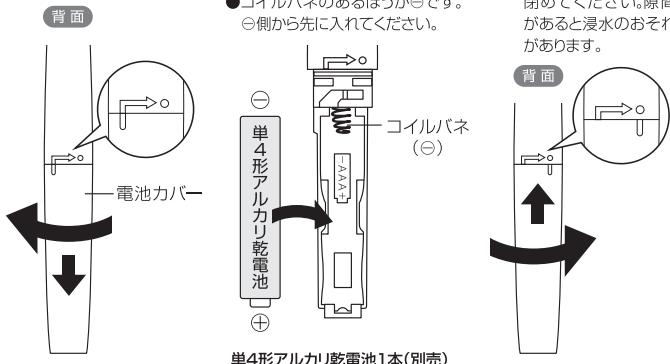

単4形アルカリ乾電池1本(別売)

ブラシの交換方法

- ① ブラシ部を矢印の
方向に回し(①)、
上に引き抜きます
(②)。
- ② 替ブラシの凹部と、
ブラシ取付軸の凸部
を合わせて差し込み
(①)、ブラシ部を元の
位置まで回してください(②)。

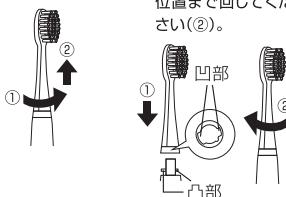

ブラシ交換時期の目安

ブラシの毛先が広がっている、もしくは一ヶ月
(1日3回使用した場合)での交換をおすすめ
します。

専用交換ブラシ(別売)
型番:HB-C5821-PB 品番:00-8344

防水保護等級について

本製品はJIS C0920:2003(IEC 60529:2001)による水の侵入に対する保護等級「IPX7」
(一定の水圧で一定時間水中に浸かっても有害な
影響がない)仕様となっておりますが、以下の点
にご注意ください。

- 水がかかる場所や湿気の多い場所で使用
するときは、必ず電池カバーをしっかり閉
まっていることを確認してください。
- 長時間、水道水やシャワーなどの噴流に當
てないでください(浸水する可能性があり
ます)。
- 石けんの泡やオイルのついた手でさわら
ないでください(浸水する可能性があり
ます)。
- ドライヤーなどで乾かさないでください
(密閉部が変形する可能性があります)。
- 水の侵入による故障につきましては、保証
期間内でも有料修理となります。

故障かなと思ったら

症 状	確認事項・対応策
電源が入らない。	乾電池は入っていますか。 $\oplus\ominus$ の向きは正しいですか。乾電池が消耗していませんか。
ブラシ部がガタつく。	しっかりと本体に取り付けられていますか。
本体が異常に熱い。	内部が破損している可能性があります。販売店または弊社修理ご相談センターに点検・修理をご依頼ください。
本体が変形している。	すぐに使用を中止し、販売店または弊社修理ご相談センターに点検・修理をご依頼ください。

主な仕様

電 源	DC1.5V 単4形アルカリ乾電池×1本(別売)	材 質	毛:PBT、柄:ABS樹脂、TPE
動作時間	約120日(1日2回・1回2分使用時)	外形寸法	径16mm×長さ193mm
音波振動	約24,000回/分(アルカリ乾電池新品使用の場合)	材 質	約20.5g(乾電池を含まず)
防水仕様	IPX7 JIS/IEC保護等級(JIS0920:2003)	付 属 品	保証書付取扱説明書

*動作時間はあくまで目安であり、使用環境・使用頻度などにより異なります。

*仕様および外観は改善のため、予告なく変更することがあります。

*本書のイラストは実際の製品と一部異なる場合があります。