

家庭用電気マッサージ器 「プチリラク」取扱説明書

このたびは、弊社の家庭用電気マッサージ器をお買いあげいただき、まことにありがとうございました。ご使用になる前に、本取扱説明書をお読みになり正しくご使用ください。
お読みになったあとは、大切に保管してください。

◆ ご使用になる前に

● 安全上のご注意く必ず「お守りください」

下記の記載事項は、お使いになる人およびまわりの人への危害や物的損害を未然に防止するための重要な内容です。必ず「お守りください」。

- ⊖ 禁止（してはいけないこと）を示します。
- ⊙ 指定する行為の強制（指示）を示します。



警告

正しく取り扱われなかった場合、人が死亡または重傷を負うことが想定される事項を示しています。

- ⊖ 次の人は本製品を使用しないでください。
 - 医師からマッサージを禁じられている人。
 - 例 血栓症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症などの治療を受けている人
- ⊙ 次の方は本製品をご使用前に必ず医師の相談を受けてください。
 - ペースメーカーなど体内埋め込み型電気機器を使用している人
 - 悪性腫瘍のある方
 - 皮膚に外傷のある人
 - 心臓に障害のある人
 - 妊娠している方および産後直後の方
 - 糖尿病などによる高度な抹消循環からくる知覚障害のある方
 - 皮膚に創傷のある人
 - 安静を必要とする人
 - 体温38℃以上（有熱期）の人
 - 骨粗しょう症の人および脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど急性疾患の人
 - 脊椎に異常のある人または背骨が左右に曲がっている人
 - その他、医療機関で治療中の人
- ⊖ 他の治療器と同時に使用しないでください。



注意

正しく取り扱われなかった場合、人が障害を負うことまたは物的損害が発生することが想定される事項を示しています。

- ⊙ 病院や接骨院など業務用には使用しないでください。本機は業務用としての機能は備えていません。
- ⊖ 修理・分解・改造をしないでください。特に機器が故障した際は、勝手に修理などせずに、販売店または販売元にご連絡ください。

<ご使用前の注意>

- ⊙ 本体に破損やひび割れがないことを確認してください。
- ⊙ ご使用前に手に持った状態で、正常に動作するか確認してからご使用ください。
- ⊙ 本製品をしばらく使用しなかった後でご使用になる場合は、機器が正常にかつ安全に動作することを確認してから、ご使用になってください。

<ご使用中の注意>

- ⊖ 10分以上の連続したご使用は避けてください。
- ⊖ 機器に故障が発見された場合には、使用を直ちに中止し、電源を切ってください。
- ⊖ 身体に異常を感じたときは、使用を直ちに中止してください。
- ⊖ 本製品を使用しても効果が現れない場合は、医師又は専門家に相談してください。
- ⊙ 本製品に浴室など水回りで使用する際は、使用前に電池蓋が確実に閉じていることを確認してください。また、水回りで電池蓋を開けないでください。
- ⊖ 塩水・温泉では使用しないでください。
- ⊖ 落下など強い衝撃を与えないでください。
- ⊖ 本製品は屋内専用です。屋外で使用しないでください。
- ⊖ 小さなお子様や乳幼児には使用させないでください。また、本体の上に乗って遊んだり、本体に乗ったりしないでください。
- ⊖ 火気・熱気の近く、エアコンの風が直接あたるところ、直射日光のあたるところでは、使用しないでください。
- <ご使用後および保管時の注意>
 - ⊙ 小さなお子様、乳幼児の手の届かないところに保管してください。
 - ⊙ 長期間（80日以上）ご使用にならない場合は、衛生的に保ち電池を取り外し湿気が少なく極端な高温・低温にならない場所に保管してください。

お手入れおよび廃棄時の注意

- ⊙お手入れをする際は、水または中性洗剤を柔らかい布に含ませて、かたく絞ってからやさしく拭いてください。その後、乾いた柔らかい布で拭いてください。
※シンナー・ベンジン・アルコール・クリーナーなどは絶対に使用しないでください。
- ⊙ 本製品を廃棄する際は、電池を取り外しお住まいの地方自治体の指示に従って廃棄してください。




警告 電池の取扱いについて

- ⊙ 万一、電池の液が目に入ったときは、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の診察・治療を受けてください。
- ⊙ 万一、電池の液が皮膚や衣服についたときは、すぐに多量のきれいな水で洗い流してください。
- ⊙ 電池の極性（+・-）を正しく入れてください。液漏れ、破裂、発熱などが発生し、ケガや火災の原因になります。必ず指定の電池を使用し、同一ブランドの新品の電池と交換してください。また、長期間（80日以上）使用しない場合は、電池を取り外しに保管してください。液漏れ、破裂などが発生し、故障の原因になります。
- ⊖ 電池を火中に入れたり、加熱、水浸ししないでください。液漏れ、破裂の原因になります。
- ⊖ 電池を廃棄する際はお住まいの地方自治体の指示に従ってください。


◆ 製品仕様

一般的名称	家庭用電気マッサージ器	34662000
販売名	プチリラク	
型番	HB-M01	
医療機器の区分	管理医療機器	
目品仕様	振動機能（毎分4,900回）	
認証番号	223AKBZX00055000	
電源	DC1.5V — — —	
使用電池	単3形乾電池×1本（電池別売）	
電池寿命	アルカリ乾電池使用時：約1ヶ月 マンガン乾電池使用時：約2週間 （室温20℃、1日5分使用時）	
外形寸法	外径25×長さ144mm	
製品重量	52g（電池重量を除く）	
付属品	取扱説明書（本書：保証書付） 添付文書	

各部の名称

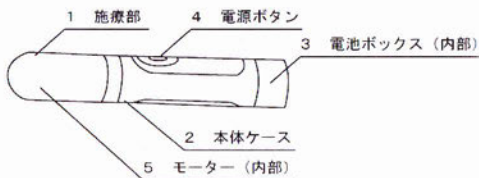

電池の交換方法

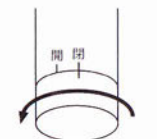

電池蓋のラインを
開にあわせる


1. 電池蓋を反時計回りに回し電池蓋を取り外します。



+極が手前

2. 電池を取り外してください。

3. 電池の極性を確認して確実にセットしてください。

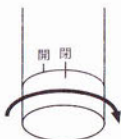

電池蓋のラインを
閉にあわせる

4. 電池蓋を時計回りに回し電池蓋を閉じてください。

操作方法又は使用方法等

※初めてご使用の際は、電池をセットしてください。

・使用前

- (1) いつも本体を清潔にする。
- (2) 本体に＋、－の極性に注意して電池を入れる。
- (3) 電源ボタンを押して、電源を入れる。このとき、正常に動作しているか確認する。
- (4) 本体の治療部を患部にやさしくあてる。

・使用中

- (1) 本体手に持ち、治療部を患部に接触させたまま保持する。
※10分以上の連続運転はおやめください。

・使用后

- (1) 治療部を患部から離す。
- (2) 電源を切る。
- (3) 汚れをふき取り、清潔にする。
- (4) 高温多湿の場所を避け、室温で保管する。長期期間使用しない場合は、必ず電池を外す。

ご使用例

本体治療部を患部にあててください。



完全防水

本製品はIPX7(旧JIS保護等級7)の防水機能を備えております。防水性能を保つために、次のことに注意してください。

- 1 電池蓋を確実に閉めてください。その際、パッキンに異物が挟み込まれていないことを確認してください。
- 2 防水機能は真水のみ対応しており、洗剤や薬品、温泉などには対応していません。
- 3 本体が濡れているときは電池蓋を開け閉めしないでください。
- 4 1mより深い所に浸さないでください。また、40分以上水中で使用しないでください。

◆故障かなと思ったら...

故障かなと思ったら、最初に下記の内容を確認してください。

1. 電源ボタンを押しても電源が入らない。
●電池の極性(+・-)が正しくセットされているか確認してください。
●電池を新しいものに交換してください。
※本書表面の電池の取扱いについてもあわせてご覧ください。

◆保証書

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
(イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障および損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧、公害、塩害、及び損傷
(ニ) 消耗または磨耗した部品、付属品の交換
(ホ) 本書のご提示がない場合
(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売ツールや領収書でも未記入項目の代用となります)
(ト) 本誌本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
(チ) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼にならない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしません。紛失しないよう大切に保管してください。

商品名	プチリラク		
商品番号	パッケージに記載		
型番	HB-M01		
お買い上げ日	年	月	日
保証期間	本体1年(お買い上げ日から)		
★お名前			
お客様	(〒 -)		
★ご注文			
様			
電話番号			
★住所	店名	電話	
販売店			

印

- (注) ●印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県川口市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ。
●フAX:ダイヤル【無料】 ●携帯電話:お客様相談室
0120-963-006 048-992-2735
電話 | 平日9:00~17:30 土曜9:00~17:00
※お休みの日、お盆・お正月は受付休業です。

2011年5月5日（新様式第1版）


機械器具 77 バイブレーター
 管理医療機器 家庭用電気マッサージ器 34662000
 プチリラク

【禁忌・禁止】

- 次の人は本製品を使用しないでください。
 ● 医師からマッサージを禁じられている人。
 例 血栓症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症などの治療を受けている人
- 次の方は本製品をご使用前に必ず医師の相談を受けてください。
 ● ペースメーカーなど体内埋め込み型医用電気機器を使用している人
 ● 悪性腫瘍のある方
 ● 皮膚に外傷のある人
 ● 心臓に障害のある人
 ● 妊娠している方および産後直後の方
 ● 糖尿病などによる高度な末梢循環からくる知覚障害のある方
 ● 皮膚に創傷のある人
 ● 安静を必要とする人
 ● 体温 38℃以上（有熱期）の人
 ● 骨粗しょう症の人および脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど急性疾患の人
 ● 脊椎に異常のある人または背骨が左右に曲がっている人
 ● その他、医療機関で治療中の人
- 他の治療器と同時に使用しないでください。
- 修理・分解・改造をしないでください。
- 10分以上の連続したご使用は避けてください。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造
 本装置は、振動子を持ったモーター、電源スイッチ、電池を内蔵した本体ケースと、直接身体に接触する施療部により構成される。

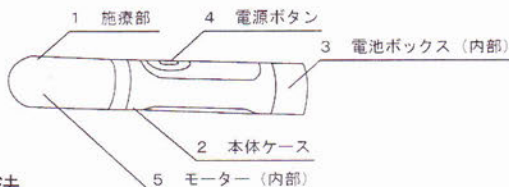

製品本体寸法

外径 25×長さ 144mm 本体材質 ABS樹脂
 使用電池 単3乾電池 × 1個（電池別売）
 電源 DC1.5V ---
 定格電流 0.5A

2. 有害な水の侵入に対する保護等級 IPX7

3. 原理

動作原理は、電源ボタンが押されることによって、モーターに通電が開始しシャフトが回転する。シャフトに取り付けられた振動子により振動が発生する。動作中は動作確認灯が点灯する。電源ボタンによって、電源の入/切をおこなう。

【使用目的、効能又は効果】

あんま、マッサージの代用とし、一般家庭でのマッサージに使用する機器である。

【品目仕様等】

（詳細は取扱説明書を参照すること）
 性能：振動回数 毎分 4.900回 ±10%

【操作方法又は使用方法等】

（詳細は取扱説明書を参照すること）

・使用前

- いつも本体を清潔にする。
- 本体に+、-の極性に注意して電池を入れる。
- 本体に電源を入れる。その際に、Oリングに破損等がないこと、ほこり等の異物が付着していないことを確認する。
- 本体の施療部を患部にやさしくあてる。

・使用中

- 本体手に持ち、施療部を患部に接触させたまま保持する。

・使用後

- 施療部を患部から離す。
- 電源を切る。
- 汚れをふき取り、清潔にする。
- 高温多湿の場所を避け室温で、Oリング表面にほこり等の異物が付着しない状態にし保管する。長期期間使用しない場合は、必ず電池を外す。

【使用上の注意】

・使用前

- 本体に破損やひび割れがないことを確認する。
- ご使用前に手に持った状態で、動作確認灯が点灯し振動が発生するか確認してから使用する。
- 本製品をしばらく使用しなかった後でご使用になる場合は、機器が動作確認灯が点灯し振動が発生するか安全に作動することを確認してから、使用する。
- Oリングに破損等がないこと、ほこり等の異物が付着していないことを確認する。

・使用中

- 10分以上の連続したご使用は避ける。
- 機器に故障が発見された場合には、使用を直ちに中止し、電源を切る。
- 身体に異常を感じたときは、使用を直ちに中止する。
- 本製品を使用しても効果が現れない場合は、医師又は専門家に相談する。
- 浴室など水回りで使用する際は、使用前に電池蓋が確実に閉まっていることを確認する。
- 浴槽内でのボタン操作をしない。
- 落下など強い衝撃を与えない。
- 本製品は屋内専用のため屋外で使用しない。
- 小さなお子様や乳幼児には使用させない。また、本体の上に乗って遊んだり、本体に乗ったりさせない。
- 火気・熱気の近く、エアコンの風が直接あたるところ、直射日光のあたるところでは、使用しない。

・保管

- 小さなお子様、乳幼児の手の届かないところに保管する。
- 長期間（80日以上）ご使用にならない場合は、衛生的に保ち電池を取り外し湿気が少なく極端な高温・低温にならない場所に保管する。

取扱説明書を必ずご参照ください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

- ・直射日光が当たる場所や高温・多湿の場所は避けること。
- ・室温で保存すること。

2. 使用期間

5年

※適正な使用環境と維持管理の基に、適切な取り扱いで本来の用途に使用された場合、設計仕様書に記された機能及び性能を維持し、使用することができる標準的な使用期間を意味する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者名：株式会社 オーム電機

住所：埼玉県吉川市旭3-8

電話番号：048-992-2735

製造業者：シャーマンイスパルグループ 株式会社
XIAMEN EASEPAL GROUP CORP

住所：No. 228 JIAOSONG ROAD, LONGCHI
INDUSTRIALZONE, JIAOMEI TOWN,
FUJIAN PROVINCE, P. R. CHINA

製造業者所在地：中国

【取扱い上の注意】

- 本製品が故障した場合は、勝手に修理などせず、販売店又は製造販売元に連絡する。
- 本製品を廃棄する際は、お住まいの地方自治体の指示に従って廃棄する。
- お手入れをする際は、水または中性洗剤を柔らかい布に含ませて、かたく絞ってからやさしく拭く。その後、乾いた柔らかい布で拭く。シンナー・ベンジン・アルコール・クリーナーなどは絶対に使用しない。

・電池について

- 電池を廃棄する際は、本製品から電池を取り外しお住まいの地方自治体の指示に従って廃棄する。
- 万一、電池の液が目に入ったときは、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の診察・治療を受けてる。
- 万一、電池の液が皮膚や衣服についたときは、すぐに多量のきれいな水で洗い流す。
- 電池の極性（+・-）を正しく入れる。
- 必ず新品の電池と交換する。
- 電池交換の際は、新品の電池と交換する。
- 電池を火中に入れたり、加熱、水没させない。

【包装】

製品本体／1箱
(電池別売)

取扱説明書を必ずご参照ください。