

電動歯ブラシ

保証書付 取扱説明書

型番:HB-C6K-W
品番:00-5836



このたびは弊社電動歯ブラシをお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をお読みのうえ、正しく安全にお使いください。この取扱説明書は、ご使用時いつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。

安全上のご注意

この製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方への危害や財産への損害を未然に防止するために、この取扱説明書をよくお読みになり注意事項を必ずお守りください。

警告

- ▲本品を分解したり改造しな。また、落としたり曲げたり強い衝撃を与えない。
- ▲本体や電池を火の中に投げ入れない。
- ▲本来の目的以外には使用しない。
- ▲幼児の手の届かない所に保管し、お子様のおもちゃとして使用しない。
- ▲本品のブラシ部分以外を水につけたり、入浴時に使用しない。

注意


- ▲ブラシを強く押し当て、ゴシゴシすることはおやめください。歯や歯ぐきを傷めます。
- ▲歯や歯ぐきの病気にかかっている方や治療中の方は、医師に相談のうえご使用ください。
- ▲ブラシ部分に衝撃や無理な力を加えないでください。
- ▲変形・変質のおそれがありますので塩素系殺菌剤・漂白剤や熱湯にはつけないでください。
- ▲力が弱ってきた時は乾電池が消費されていますので、必ず新しい乾電池2本同時にお取り替えてください。また、乾電池に液もれがないか定期的に点検し、使い終わった乾電池はすぐに本体から取り出してください。
- ▲長期間(1か月以上)使用しない場合は必ず電池を取り外しておいてください。
- ▲電池を廃棄する際は、お住まいの自治体の指示に従ってください。

主な仕様	
電源	単3形アルカリ乾電池2本(別売)
電池寿命	約2か月 1日2回/1回2分使用時 (新品アルカリ乾電池使用時)
振動数	約6000回/分(無負荷時)
ナビタイマー機能	2分経つと自動でOFF 30秒ごとに一時停止でお知らせ
質量	約84g(電池含まず)
材質	本体:ABS樹脂 ブラシ部:ナイロン樹脂
本体寸法	幅29×高さ208×奥行40mm

※外観、仕様は予告なく変更することがあります。※電池寿命はあくまで目安であり、使用環境・使用頻度などにより異なります。※本書のイラストは実際の製品と一部異なる場合があります。

乾電池の入れかた

- 1.電池カバーを、矢印の方向に少しひねりながら引き抜いてください。
- 2.単3形乾電池2本を、図示のとおり⊕と⊖を間違えないように注意して入れます。
- 3.電池カバーを本体に強く押し込み、カチッと音がするまで確実に差し込みます。

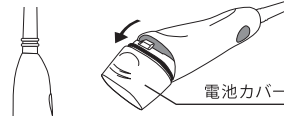


※電池交換のときは、本体の水気をよくふき取ってから電池カバーを外してください。

※古い電池は、2本同時に交換してください。

電池寿命:単3形アルカリ乾電池2本で約1ヶ月使用可能。
(1日2回/1回2分使用時)
(新品アルカリ乾電池使用時)
※使用状況によって異なります。

ご使用方法

- 1.スイッチをオンにします。
※ブラシを歯に軽く当てるようにして1本1本ていねいに磨いてください。
- 2.スイッチを再度押してオフにします。
※ブラシ部分を水洗いした後、よく水気を切ってください。

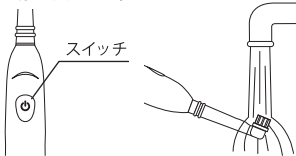

▲ブラシ部分だけを水につけて洗ってください。本体は、水がかからないようにして水にぬれた場合は軽くふき取ってください。

ナビタイマー機能

- 30秒お知らせ機能について
電源を入れてから、30秒ごとに一時停止し、経過をお知らせします。右上、左上、左下、右下と順に磨くときの目安になります。
- 自動電源オフについて
電源を入れてから2分経つと自動で電源が切れます。

ブラシの交換方法

- ▲ブラシを抜くときは垂直に引いてください。
- ▲ブラシを差し込むときは根元まですき間の無いようにしっかりと差し込んでください。
- ※ブラシは消耗品です。毛先が開いてきたり、毛の部分が汚れたときは新しいものと交換してください。
- ※毛先の消耗したブラシでは効果が損なわれるばかりではなく、歯と歯ぐきに害を及ぼすことがありますので、早めにご交換してください。

替ブラシは別売の専用交換ブラシ「HB-C5836(品番:00-5837)」をご利用ください。

保証規定

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意事項に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 2.保証期間内で次の場合には有料修理とします。
(イ)使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
(ロ)お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛りなどによる故障及び損傷
(ニ)消耗または摩耗した部品、付属品の交換
(ホ)本書のご提示がない場合
(ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります。)
(ト)本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
(チ)一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- 3.ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

保証書

商品名	電動歯ブラシ		
型番	HB-C6K-W	品番	00-5836
★お買い上げ日:	年	月	日
保証期間: 本体1年間(お買い上げの日から)			
ふりがな	様		
★お名前	様		
★ご住所	〒 -		
電話	()		
★住所 店名 電話			
販売店	(印)		

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
http://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせは **お客様相談室**へ
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
電話受付 平日9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は **修理ご相談センター**へ
電話受付 **048-992-3970** 平日9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます