



各部の名称

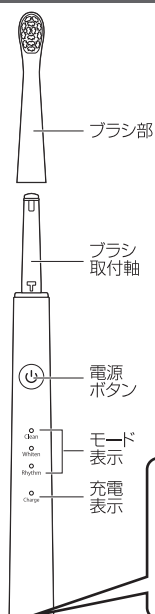

ブラシ部の交換方法

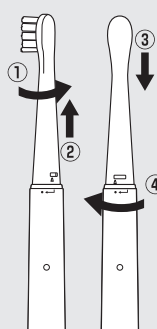

ブラシ部を矢印の方向に回し(①)、引き抜いてください(②)。新しいブラシを取り付けるときは、ブラシ取付軸の凹凸と新しいブラシの取付部の凹凸を合わせて差し込み(③)、元の位置まで確実に回してください(④)。


ブラシ交換時期の目安:

ブラシの毛先が広がっている、もしくは1ヶ月(1日3回歯みがきの場合)でブラシの交換をおすすめします。

別売交換ブラシ 型番:HB-C5838
(2本入り) 品番:00-5842

充電のしかた

付属の充電コードを使って、本機とパソコンまたはUSB充電アダプタ(別売)を接続してください。双方を正しく接続すると、本機の充電表示「Charge」が赤く点灯し、充電が始まります(充電中は使用できません)。

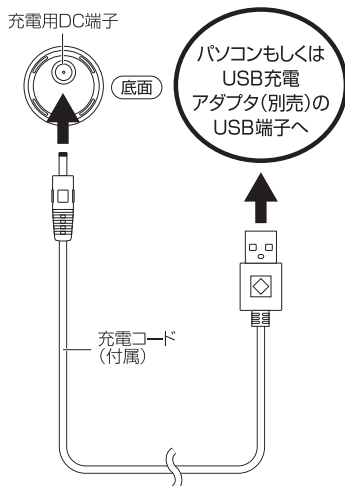

電池残量が少なくなると充電表示「Charge」が10回ほど点滅してお知らせします。残量ゼロからフル充電まで約6時間かかります。フル充電後は「Charge」点灯が消えます。

付属の充電コードは本製品専用です。本製品を充電する際には必ず付属の充電コードをお使いください。また、付属の充電コードは絶対に他の製品には使わないでください。製品の破損、もしくは火傷・発煙・火災の原因となる場合があります。


使いかた

- 1 口の中にブラシを入れてから電源ボタンを押して電源を入れます。
- 2 上手なみがきかた
- 3 みがき終わったら、口から取り出す前に電源ボタンを押して電源を切ります。

- 歯みがき粉などの飛び散りを防ぐため、口に入れた後に電源を入れてください。
- 最初は「Clean(弱)」モードで振動します。その後、3秒以内であれば、電源ボタンを押すたびに、モードが変わります。

歯面や噛み合わせ面

歯に対して90°の角度で当てます。

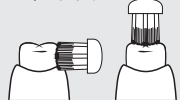




歯と歯ぐきの境目

毛先が境目に入りやすいよう45°の角度で当てます。



前歯の裏

歯ブラシを立て、1本ずつ丁寧に当てます。

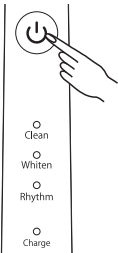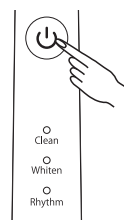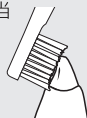

電源入 Clean
振動弱

Whiten
振動強

電源切

Rhythm
ミックス(弱→強)

モードの切替とメモリー機能について

モードを切り換えるときは、電源を入れてから3秒以内に電源ボタンを数回押してください(3秒経過後に電源ボタンを押すと電源が切れます)。また、本製品はメモリー機能を搭載しており、次に電源を入れたときは、最後に電源を切ったときのモードで起動します。

ナビタイマーについて

電源を入れてから30秒ごとに一時停止し、経過をお知らせします。右上、左上、左下、右下と順にみがくときの目安になります。また、電源を入れてから2分経つと本機は自動で電源が切れます。

お手入れのしかた

必ず電源が切れた状態で行ってください。

- 1 ブラシ部を本体から取り外します。
- 2 ブラシ部を水道水で十分に洗い流します。
- 3 本体の汚れを水道水で軽く洗い流します。
- 4 本体及びブラシ部についた水分を拭き取り、十分に乾かします。

汚れを拭き取る際に、シンナーやベンジン、アルコールは絶対に使用しないでください。変形や変色のおそれがあります。



シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しない

故障かなと思ったら

症 状	確認事項・対応策
電源が入らない。	充電量が少なくなっていないですか。充電し直してください。
ブラシ部がガタつく。	しっかりと本体に取り付けられていますか。
本体が異常に熱い。	内部が破損している可能性があります。販売店または弊社修理ご相談センターに点検・修理をご依頼ください。
本体が変形している。	すぐに使用を中止し、販売店または弊社修理ご相談センターに点検・修理をご依頼ください。

主な仕様

電 源	DC5V(USB給電:充電用DC端子 径3.5mm) ※ニッケル水素電池内蔵
動作時間	約25日(フル充電後、1日2回、1回2分使用時)
充電時間	約6時間(残量なしからフル充電まで)
音波振動	約38000回/分(Whitenモード時)
防水仕様	IPX7(防浸形) JIS/IEC保護等級(JIS C 0920:2003)による
材 質	毛:ナイロン、柄:ABS樹脂・シリコン
外形寸法	長さ228×径20mm
質 量	約41g
付属品	専用充電コード、専用ブラシ(2本)、保証書付取扱説明書

※外観、仕様は予告なく変更することがあります。※動作時間はあくまで目安であり、使用環境・使用頻度などにより異なります。※本書のイラストは、実際の製品と一部異なる場合があります。