

ハイパワー 音波歯ブラシ (充電式)

保証書付 取扱説明書

型番：HB-C548K
-W/P/A

品番：00-5838/
5839/5840



このたびは弊社音波歯ブラシをお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をお読みのうえ、正しく安全にお使いください。この取扱説明書は、ご使用時にいつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。

保証書

商品名	ハイパワー音波歯ブラシ(充電式)		
型番	HB-C548K -W/P/A	品番	00-5838/ 5839/5840
★お買い上げ日： 年 月 日			
保証期間：本体1年間(お買い上げの日から)			
お客様	ふりがな ★お名前 様		
	★ご住所 〒 -		
	電話 ()		
販売店	★住所 店名 電話		

(注)
★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

©HNA 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは
お客様相談室
●通話料無料 0120-963-006
●携帯・IP・公衆電話からは 048-992-2735
電話受付 平日 9:00~17:00

※土・日・祝日及び年末年始は除きます
修理に関するご相談は 修理ご相談センター
電話受付 平日 9:00~17:00
※土・日・祝日及び年末年始は除きます

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間内で多次の場合には有料修理となります。
(イ)使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
(ロ)お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛りなどによる故障及び損傷
(ニ)消耗または摩耗した部品、付属品の交換
(ホ)本書のご提示がない場合
(ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収証でも未記入項目の代用となります。)
(ト)本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
(チ)一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

安全上のご注意

ここに示してある注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の方々への危険や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った使いかたをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。		⚠ 注意 この表示を無視して、誤った使いかたをすると、感電やその他の事故・けがをしたり、周辺の家財に損害を与えたりする可能性が想定される内容です。	
! 必ず守る	万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常を感知したら、すぐに電源を切り、使用を中止する。充電中の場合は充電コードを取り外す。 ●火災・感電の原因となります。 ●煙が出なくなるのを確認して販売店または弊社修理ご相談センターに修理をご依頼ください。	🚫 禁止	歯や歯ぐきに歯ブラシを強く押し当てたり、長時間同じ場所をみがかない。 ●歯や歯ぐきを傷つけたり、故障の原因になります。
	次の方は使用しない。 ・口内の感覚が敏感な方 ・口腔または歯周の手術直後や治療中の方 ・口腔内に気になる病状(治療中の歯、不安定な入れ歯など)がある方 ・歯ぐきからの出血が続く、または大量の出血がある方 ●傷口の悪化やけがの原因になります。		歯みがき以外の目的に使用しない。 ●事故やトラブルの原因になります。
	複数人で共用しない。 ●病原菌に感染する原因になります。		人以外に使用しない。 ●事故やトラブルの原因になります。
	お子様の手の届くところに保管しない。またお子様に単独で使させない。 ●思わぬけがを負うおそれがあります。		自分で意思表示ができない人に使用しない。 ●事故やトラブルの原因になります。
	🚫 分解禁止 本体を分解、修理、改造しない。 ●感電の原因となります。		お手入れの際、シンナーやベンジン、アルコールは絶対に使わない。また、化粧品やハンドクリームなど油成分の付いた手で使わない。 ●故障・変形・変色の原因となります。
		! 必ず守る	周囲の人の不意の動作に気をつける。 ●接触によりけがをするおそれがあります。
			使用後は電源を必ず切る。 ●充電電池の消耗を抑えます。

リチウムイオン電池について


本製品はリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池は繰り返し充電できますが、充電回数や経年変化により性能が徐々に低下します。充電時間が長くなったり、給電性能が落ちてきたら、新しい製品をお買い求めください。
なお、製品を廃棄する際は、お住まいの地方自治体の廃棄処分方法に従ってください。

防水保護等級について


本機はJIS/IEC保護等級(JIS C 0920:2003)による水の浸入に対する保護等級「IPX7」(防浸形：一定の水圧で一定時間水中に浸かっても有害な影響がない)仕様となっておりますが、以下の点にご注意ください。

- 長時間、水中に放置しないでください(浸水する可能性があります)。
- 石けんの泡やオイルのついた手でさわらないでください(浸水する可能性があります)。
- ドライヤーなどで乾かさないでください(密閉部が変形する可能性があります)。
- 水の浸入による故障につきましては保証期間内でも有料修理となります。

各部の名称

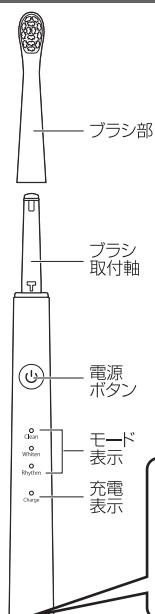

ブラシ部の交換方法

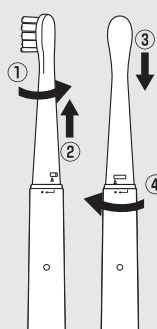

ブラシ部を矢印の方向に回し(①)、引き抜いてください(②)。新しいブラシを取り付けるときは、ブラシ取付軸の凹凸と新しいブラシの取付部の凹凸を合わせて差し込み(③)、元の位置まで確実に回してください(④)。


ブラシ交換時期の目安:

ブラシの毛先が広がっている、もしくは1ヶ月(1日3回歯みがきの場合)でブラシの交換をおすすめします。

別売交換ブラシ 型番:HB-C5838
(2本入り) 品番:00-5842

充電のしかた

付属の充電コードを使って、本機とパソコンまたはUSB充電アダプタ(別売)を接続してください。双方を正しく接続すると、本機の充電表示「Charge」が赤く点灯し、充電が始まります(充電中は使用できません)。

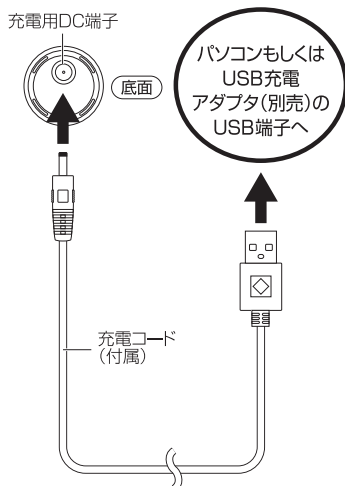

電池残量が少なくなると充電表示「Charge」が10回ほど点滅してお知らせします。残量ゼロからフル充電まで約6時間かかります。フル充電後は「Charge」点灯が消えます。

付属の充電コードは本製品専用です。本製品を充電する際には必ず付属の充電コードをお使いください。また、付属の充電コードは絶対に他の製品には使わないでください。製品の破損、もしくは火傷・発煙・火災の原因となる場合があります。


使いかた

- 1 口の中にブラシを入れてから電源ボタンを押して電源を入れます。
- 2 上手なみがきかた
- 3 みがき終わったら、口から取り出す前に電源ボタンを押して電源を切ります。

- 歯みがき粉などの飛び散りを防ぐため、口に入れた後に電源を入れてください。
- 最初は「Clean(弱)」モードで振動します。その後、3秒以内であれば、電源ボタンを押すたびに、モードが変わります。

歯面や噛み合わせ面

歯に対して90°の角度で当てます。

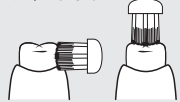




歯と歯ぐきの境目

毛先が境目に入りやすいよう45°の角度で当てます。



前歯の裏

歯ブラシを立て、1本ずつ丁寧に当てます。

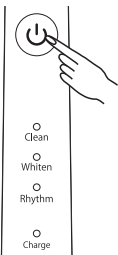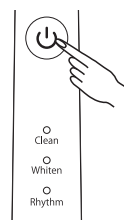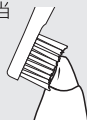

電源入 Clean
振動弱

Whiten
振動強

電源切

Rhythm
ミックス(弱→強)

モードの切替とメモリー機能について

モードを切り換えるときは、電源を入れてから3秒以内に電源ボタンを数回押してください(3秒経過後に電源ボタンを押すと電源が切れます)。また、本製品はメモリー機能を搭載しており、次に電源を入れたときは、最後に電源を切ったときのモードで起動します。

ナビタイマーについて

電源を入れてから30秒ごとに一時停止し、経過をお知らせします。右上、左上、左下、右下と順にみがくときの目安になります。また、電源を入れてから2分経つと本機は自動で電源が切れます。

お手入れのしかた

必ず電源が切れた状態で行ってください。

- 1 ブラシ部を本体から取り外します。
- 2 ブラシ部を水道水で十分に洗い流します。
- 3 本体の汚れを水道水で軽く洗い流します。
- 4 本体及びブラシ部についた水分を拭き取り、十分に乾かします。

汚れを拭き取る際に、シンナーやベンジン、アルコールは絶対に使用しないでください。変形や変色のおそれがあります。



シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しない

故障かなと思ったら

症 状	確認事項・対応策
電源が入らない。	充電量が少なくなっていないですか。充電し直してください。
ブラシ部がガタつく。	しっかりと本体に取り付けられていますか。
本体が異常に熱い。	内部が破損している可能性があります。販売店または弊社修理ご相談センターに点検・修理をご依頼ください。
本体が変形している。	すぐに使用を中止し、販売店または弊社修理ご相談センターに点検・修理をご依頼ください。

主な仕様

電 源	DC5V(USB給電:充電用DC端子 径3.5mm) ※リチウムイオン電池内蔵
動作時間	約25日(フル充電後、1日2回、1回2分使用時)
充電時間	約6時間(残量なしからフル充電まで)
音波振動	約38000回/分(Whitenモード時)
防水仕様	IPX7(防浸形) JIS/IEC保護等級(JIS C 0920:2003)による
材 質	毛:ナイロン、柄:ABS樹脂・シリコン
外形寸法	長さ228×径20mm
質 量	約41g
付属品	専用充電コード、専用ブラシ(2本)、保証書付取扱説明書

※外観、仕様は予告なく変更することがあります。※動作時間はあくまで目安であり、使用環境・使用頻度などにより異なります。※本書のイラストは、実際の製品と一部異なる場合があります。