


Iberis

音波歯ブラシ除菌ケース付 (電池別売)

保証書付取扱説明書

型番 : HB-C557K-W
品番 : 00-5849

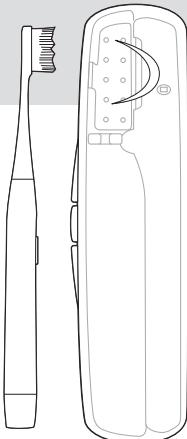

このたびは弊社音波歯ブラシ除菌ケース付をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をお読みのうえ、正しく安全にお使いください。この取扱説明書は、ご使用時にいつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。

保証書			
商品名	音波歯ブラシ除菌ケース付(電池別売)		
型番	HB-C557K-W	品番	00-5849
★お買い上げ日 : 年 月 日			
保証期間 : 本体1年間(お買い上げの日から)			

お客様	ふりがな ★お名前	様
	★ご住所 〒 -	
販売店	電話 ()	(印)

★住所 店名 電話	(印)
-----------	-----

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

◎OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは

お客様相談室
●通話料無料
0120-963-006
●携帯・IP・公衆電話からは
048-992-2735

電話受付

平日 9:00～17:00

※土・日・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は

修理ご相談センター

電話受付

048-992-3970

平日 9:00～17:00

※土・日・祝日及び年末年始は除きます

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。

- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。

(1) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷

(2) 買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷

(3) 火災、地震、水害、雷害、その他の天災地変、公害、塙害、異常電圧、水掛けなどによる故障及び損傷

(4) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換

(5) 本書のご提示がない場合

(6) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収証でも未記入項目の代用となります)。

(7) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷

(8) 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷

- 贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

- 日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

安全上のご注意

ここに示してある注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の方々への危険や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告 必ず守る	万ー、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常を感じたら、すぐに電源を切り、乾電池を取り外す。 ●火災・感電の原因となります。 ●煙が出なくなるのを確認して販売店または弊社修理ご相談センターに修理をご依頼ください。
	次の方は使用しない。 ・口内の感覚が敏感な方 ・口腔内に気になる病状がある方 ・口腔または歯周の手術直後の方や治療中の方 ・口腔内に出血などがある方 ●傷口の悪化やけがの原因になります。
複数の人で共用しない。	●病原菌に感染する原因になります。
お子様の手の届くところに保管しない。お子様に単独で使用させない。	●思わぬけがを負うおそれがあります。
分解禁止	本体を分解、修理、改造しない。 ●感電の原因となります。


注意 この表示を無視して、誤った使いかたをすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与える可能性が想定される内容です。

禁止	歯や歯ぐきに歯ブラシを強く押し当てるたり、長時間同じ場所をみがかない。 ●歯や歯ぐきを傷つけたり、故障の原因になります。
	歯みがき以外の目的に使用しない。 ●事故やトラブルの原因になります。
人以外に使用しない。	●事故やトラブルの原因になります。
自分で意思表示ができない人に使用しない。	●事故やトラブルの原因になります。
お手入れの際、シンナーーやベンジン、アルコールは絶対に使わない。また、化粧品やハンドクリームなど油成分の付いた手で使わない。	●故障・変形・変色の原因になります。
周囲の人の不意の動作に気をつける。	●接触によりけがをするおそれがあります。
必ず守る	使用後は電源を必ず切る。長期間使わないときは乾電池を取り外す。 ●乾電池の消耗を抑えます。

乾電池を安全にお使いいただくために

警告	・火中への投入、加熱、分解をしない ・取り外した乾電池を幼児に触らせない ・ショートさせない ・直射日光や火などの過度の熱にさらさない
	・⊕の表示どおりに入れる ・指定以外の乾電池を入れない ・使用推奨期限内の乾電池を使う ・古い乾電池と新しい乾電池、マンガンとアルカリなど種類の異なる乾電池と一緒に入れない ・使い切った乾電池はすぐに取り出す ・長期間使わないときは乾電池を取り外しておく
注意	液もれ、発熱、破裂などの事故を防ぐために、以下のことをお守りください。
	●万ー、液もれしたら、液をよく拭き取ってください。また、液が皮膚や衣類に付着した場合はすぐに大量の水で洗い流してください。 ●万ー、もれた液が目に入ったときは、失明の原因となるので、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師に相談してください。 ●使用済みの乾電池を廃棄する場合、自治体の条例などで決まりがあるときにはそれに従って廃棄してください。


各部の名称

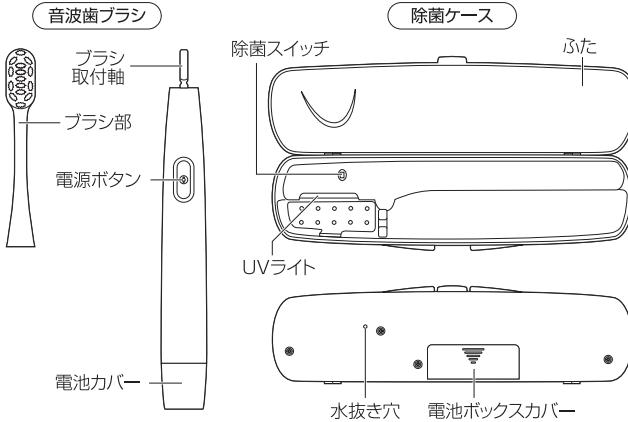

乾電池の入れかた


音波歯ブラシ

- 1** 電池カバーを矢印の方向に回して外します。
●浸水を防ぐため、固めに閉まっていることがあります。
- 2** 単4形アルカリ乾電池1本(別売)を $\oplus\ominus$ の表示どおりに正しく入れます。
●必ずアルカリ乾電池をご使用ください。マンガン乾電池は電池容量が小さく、本製品には向きです。
- 3** 電池カバーを元どおりにしっかりと閉めます。
●電池カバーはしっかりと奥まで差し込み、「○」の位置まで確実に回して閉めてください。隙間があると浸水のおそれがあります。

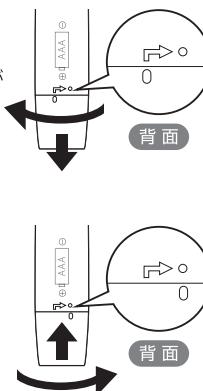

除菌ケース

- 1** 電池ボックスカバーの \square 部を押しながら、矢印の方向に動かして取り外します。
- 2** 単3形アルカリ乾電池2本(別売)を $\oplus\ominus$ の表示どおりに正しく入れます。
●必ずアルカリ乾電池をご使用ください。マンガン乾電池は電池容量が小さく、本製品には向きです。

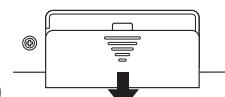

- 3** 電池ボックスカバーを元どおりにしっかりと閉めます。

主な仕様

電 源	音波歯ブラシ / DC1.5V 単4形アルカリ乾電池×1本(別売) 除菌ケース / DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本(別売)
動作時間	音波歯ブラシ / 約120日(新品アルカリ乾電池:1日2回、1回2分使用時) 除菌ケース / 約90回(新品アルカリ乾電池:1回約7分使用時)
音波振動	約18000回／分(新品アルカリ乾電池の場合)
防水仕様	IPX7(防浸型) JIS/IEC保護等級(JIS C 0920:2003による) ※音波歯ブラシのみ
スイッチ	オン／オフ
材 質	毛/ナイロン、柄/ABS樹脂・シリコン
外形寸法	音波歯ブラシ / 長さ197×径16mm 除菌ケース / 幅62×長さ223×奥行28mm
質 量	音波歯ブラシ / 約19g 除菌ケース / 約108g ※いずれも乾電池を含まず
付 属 品	保証書付取扱説明書

*外観及び仕様は予告なく変更する場合があります。

*動作時間はあくまで目安であり、使用環境・使用頻度などにより異なります。

*本書のイラストは、実際の製品と一部異なる場合があります。

使いかた

- 1** 除菌ケースから音波歯ブラシを取り出します。
口の中にブラシを入れてから、電源ボタンを押します。
●歯みがき粉などの飛び散りを防ぐため、口に入れた後に押してください。
●カチッと音がするまでしっかりと電源ボタンを押してください。
 - 2** 上手なみがきかた
●ブラシは毛先が歯に軽く触れる程度に当ててください。
●速く動かしたり、大きく動かしたりせず、歯1~2本ごとに丁寧に当てていくと上手にみがけます。
-
-
-
- 3** みがき終わったら、口から取り出す前に電源ボタンを押して電源を切ります。
●カチッと音がするまで電源ボタンを押してください。
 - 4** 音波歯ブラシを除菌ケースに戻してふたを閉めます。
●ふたを閉めるとUVライトが点灯して、除菌が始まります。
●UVライトは約7分後に自動で消灯します。

ブラシ部の交換方法

本体とブラシ部をしっかりと持つて、ブラシ部を引き抜きます。取り付けるときはそれぞれの正面を手前に向けて、ブラシ取付軸にブラシ部をしっかりと差し込みます。

ブラシの毛先が広がっている、もしくは1ヶ月(1日3回歯みがきの場合)でブラシの交換をおすすめします。

別売交換ブラシ 型番:HB-C5849
品番:00-5852

防水保護等級について

防水仕様は音波歯ブラシのみです。

本製品の音波歯ブラシはJIS/IEC保護等級(JIS C 0920:2003)による水の浸入に対する保護等級IPX7(防浸型:一定の水圧で一定時間水中に浸かっても有害な影響がない)仕様となっておりますが、以下の点にご注意ください。

- 水がかかる場所や湿気の多い場所で使用するときは、必ず電池カバーがしっかりと閉まっていることを確認してください。
- 長時間、水中に放置しないでください(浸水する可能性があります)。
- 石けんの泡やオイルのついた手でさわらないでください(浸水する可能性があります)。
- ドライヤーなどで乾かさないでください(密閉部が変形する可能性があります)。
- 水の浸入による故障につきましては保証期間内でも有料修理となります。

故障かなと思ったら

症 状	確認事項・対応策
電源が入らない。 UVライトが点灯しない。	乾電池は入っていますか。 $\oplus\ominus$ の向きは正しいですか。乾電池が消耗していませんか。
ブラシ部がガタつく。	しっかりと本体に取り付けられていますか。
異常に熱い。	内部が破損している可能性があります。販売店または弊社修理ご相談センターに点検・修理をご依頼ください。
変形している。	すぐに使用を中止し、販売店または弊社修理ご相談センターに点検・修理をご依頼ください。

お手入れのしかた

必ず電源が切れた状態で行なってください。

- 音波歯ブラシ** ブラシ部を本体から取り外し、本体及びブラシ部を水道水で洗い流してください。その後、水分を拭き取り、十分に乾かしてください。
- 除菌ケース** 柔らかい布でから拭いてください。汚れがひどい場合は、水で布を湿らすか、中性洗剤を少し布につけて拭き、その後にから拭きをしてください。防水仕様ではありませんので、絶対に水洗いはしないでください。

シンナー・ベンジン、アルコールは絶対に使用しないでください。変形や変色のおそれがあります。