



型番

品番

HB-CN88-W

00-8775

HB-CN88-P

00-8776


HB-CN88-G

00-8777

音波振動歯ブラシ

取扱説明書

この度は、当商品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をお読みにになり、正しくお使いください。
また、保証書として大切に保管してください。

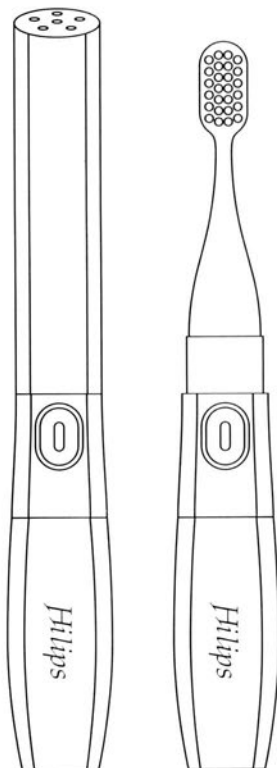

安全上のご注意

お使いになる人及びまわりの人への危害や物的損害を未然に防止するための重要な内容です。
必ずお守りください。



警告 正しく取り扱われなかったとき、人が死亡または重傷を負うことが想定される事項を示しています。



注意 正しく取り扱われなかったとき、人が傷害を負うことまたは物的損害が発生することが想定される事項を示しています。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(下記は図記号の例です)



禁止 (してはいけないこと)を示します。



指定する行為の強制(指示)を示します。

警告



禁止

- 乳幼児の手の届くところに置かないでください。
誤飲やけがなど事故の原因になります。

注意



必ず守る

- 歯周病がひどい方などは医師にご相談のうえ、使用してください。
けがをしたり、歯や歯ぐきを痛める原因になります。

- 乾電池に表示されている注意内容を必ず守ってください。
- 乾電池は+、-極を確かめ、正しく入れてください。
- 使い切った乾電池はすぐに取り出してください。
- 長時間使用しないときは、乾電池を取り出して保管してください。
乾電池の発熱、破裂、液漏れによるけがなどの原因になります。



禁止

- 乾電池を火の中に投入したり、分解、ショートさせないでください。
やけどやけがの原因になります。

- 充電式の電池は使わないでください。発熱し、やけどの原因になります。

- 歯や歯ぐきにブラシを強く当てたり、あて続けしないでください。
- ブラシのプラスチック部分を歯にあてないでください。
- 乳幼児や自分で操作ができない方、口内の感覚が弱い方などは使用しないでください。
- 治療中の歯や不安定な入れ歯など口内に気になる症状がある場合は、その部位に使用しないでください。
- 美白用・ヤニ取り用などの研磨剤が多く含まれている歯磨き剤との併用はお避けください。


けがをしたり、歯や歯ぐきを傷める原因になります。



分解禁止

- 改造はしないでください。また、分解したり修理をしないでください。
思わぬ事故、トラブルの原因になります。修理はお買い上げの販売店またはお客様相談室にご相談ください。

各 部 名 称

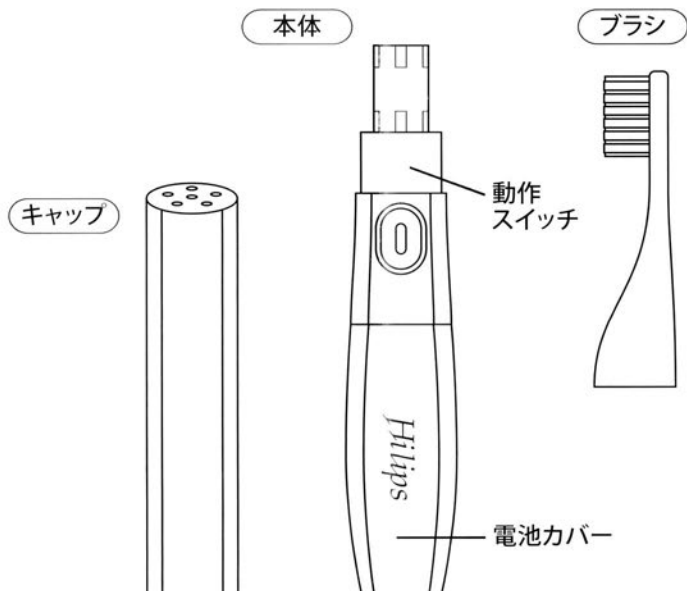


乾電池の入れ方

ご注意


- 乾電池は同梱されていません。販売店で買い求めください。
- アルカリ乾電池を入れるときは、歯ブラシ本体をよくふいて水滴が中に入らないようにしてください。
- 必ずアルカリ乾電池を使用してください。アルカリ乾電池以外を使用されますと、使用回数が極端に短くなる場合があります。

① 電池カバーを回して取り外します。

- ①電池カバーの指示線が本体の取り付け位置にくるまで回します
- ②電池カバーを取りはずしてください

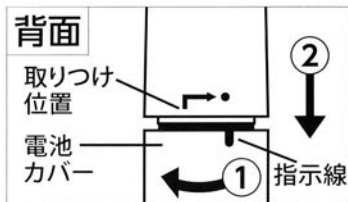


- ② 単4形アルカリ乾電池を入れます。

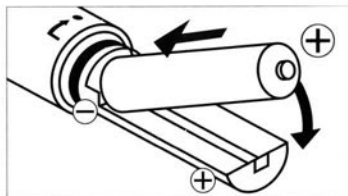

- ③ 電池カバーを回して取りつけてください。

① 電池カバーの指示線と本体の取り付け位置を合わせ差し込んでください

② 電池カバーの指示線が本体の固定位置●部にくるまで回してください

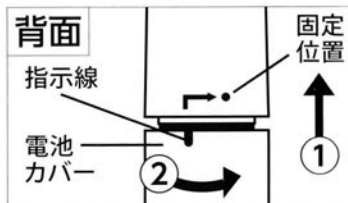


ご使用方法

ご注意

- 歯のお手入れ以外の目的に使用しないでください。
- 落としたり乱暴に扱ったりしないでください。
- 外観を損なう恐れがありますので、整髪料、ハンドクリームなどが本体につかないようにしてください。

- ① キャップを取りはずします。

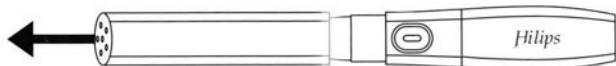

- ② ブラシがしっかり固定されているか確認してください。

○ しっかり固定されている

✗ 固定されていない




ブラシの取り付け方

- ① ブラシの指示線と本体の取り付け位置を合わせて差し込んでください

※ ブラシの指示線と本体の取り付け位置を合わせずに差し込むと、本体やブラシが破損する原因になります

- ② ブラシの指示線が本体の固定位置●部にくるまで回してください

※ 強く閉めすぎると本体やブラシが変形し、破損する原因になります

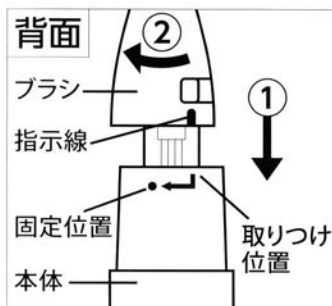

③ 動作スイッチをしっかりと押し込んで動作させます。

○ 動作スイッチは、しっかりと押し込んでください。
軽く押しただけの場合、押ししている間しか動作しないことがあります。

○ 動作スイッチは、指の腹で押ししてください。
爪で押さないでください。
動作スイッチのゴムが、破れる恐れがあります。



④ 本体を手で動かして、歯を磨いてください。

○ 手磨きするように、ブラシを動かして磨きます。ブラシを歯にあてるだけでは十分に汚れは除去できませんので、ブラシを動かして使用していただくことをおすすめします。

○ 歯ぐきも磨いていくことで、より効率よく磨くことが出来ます。

○ 歯や歯ぐきにブラシを強くあてすぎないようにしてください。

⑤ 使い終わったら動作スイッチをしっかりと押し込んで動作を止めてください。

電池残量が少なくなってきたら

- 振動が小さくなり、磨き感が弱くなります。新しいアルカリ乾電池に交換してください。
(※P.3参照)

ご使用後のお手入れ


ご注意

- 洗剤を使用する場合は中性洗剤を使用してください。
- シンナーやベンジン、アルコールは故障や部品の割れ・変色などの原因になりますので、絶対に使用しないでください。

ブラシの取りはずし方

- ①ブラシの指示線が、本体の取り付け位置にくるまで回してください。
- ②ブラシを取り外してください。

※ブラシを固定位置の状態のままでは引っぱらないでください。ブラシ本体が破損する原因になります。

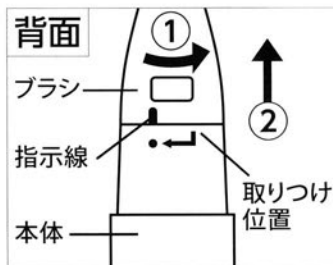

お手入れ方法

- ① **ブラシ部:**
 - ご使用の度にブラシ毛先など流水でよくあらってください。
 - ブラシの毛を強く引っ張らないでください(毛が抜ける原因になります)。
- ② **本体部:**
 - 水洗い後は、よく水分をふき取ってください。
 - 本体を水の中に放置しないでください(内部に水が入る原因になります)
- ③ **キャップ部:**
 - 水洗い後は、キャップとブラシ部をよく振って十分に水気を切り、乾いたタオルなどで水分をふき取ってください。(濡れたままですと、ポーチや鞆などが汚れる原因になります)

修理を依頼される前に

こんなときは

動作スイッチを
押しても
動作しない

振動が弱い/
すぐ停止する

考えられる原因

乾電池が正しく
入っていない

乾電池残量が
なくなっている

乾電池残量が
少なくなっている

処 置

乾電池を正しく
入れてください
(※P.3参照)


新しい乾電池に
交換してください
(※P.3参照)

上記の点検・処置はされましたか？

- 上記の処置後も異常がある場合は、お買い上げの販売店へご連絡ください。
- 修理をご依頼される場合は、保証書と本体を販売店へご持参ください。(※P.8参照)

別 売 品

替ブラシをご用意しています。以下の製品をご用意ください。

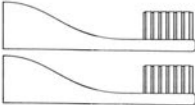		品番
Hilips音波振動歯ブラシ用 替ブラシ (2本入り)		00-8876

仕 様

電 源 方 式
プラストローク数(無負荷振動数)
使 用 時 間
外 形 寸 法
質 量

単4形アルカリ乾電池 1本(別売)
約18,000/分
1回2分×1日2回×約40日
最大径22mm×長さ160mm
約32g(電池含まず)

アフターサービスおよび保証書

持込修理 無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保障期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - ご購入後後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛かり等による故障及び損傷
 - 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - 本書のご提示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書き変えられた場合(但し、販売シールや領収証でも未記入項目の代用となります。)
 - 商品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理後相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名：音波振動歯ブラシ		型番：HB-CN88-W 品番：00-8775	HB-CN88-P 00-8776	HB-CN88-G 00-8777
★お買い上げ日 年 月 日		保証期間：1年間(お買い上げ日から)		
お客様	★お名前	★ご住所(〒 -) 電話 ()		
	★住所・店名・電話	(印)		
修理メモ				

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
- ※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保障期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは **お客様相談室**へ
●フリーダイヤル(無料) ●携帯電話・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
電話受付 平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00
日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は **修理ご相談センター**へ
電話受付 **048-992-3970** 平日 9:00~17:00
土・日・祝日及び年末年始は除きます