

型番:YB-007WT 商品番号:07-4400

デジタル体重計


取扱説明書 (保証書付)

このたびは、デジタル体重計をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ございます。

ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

この取扱説明書の裏面には、保証書が付属していますので大切に保管してください。

保証書は、お買い上げの年月日・販売店名等の記入を必ず確かめてから
お受け取りください。

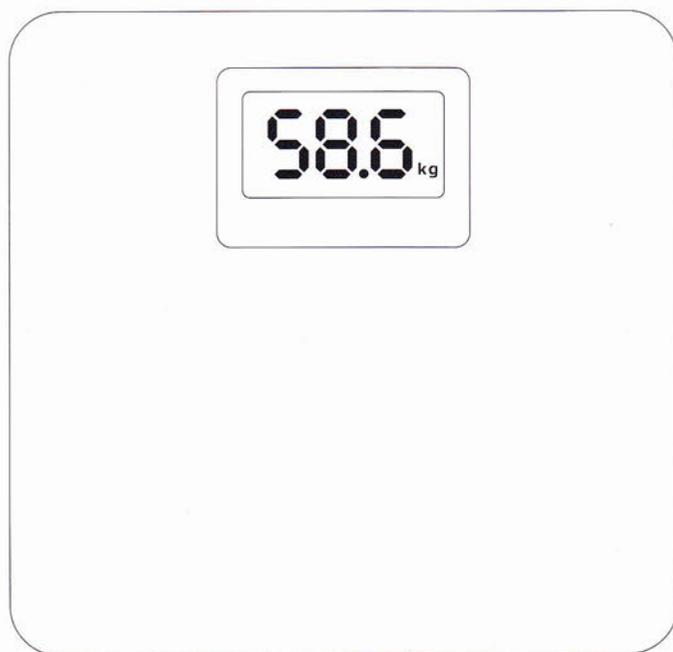

OHM ELECTRIC INC.

目次

安全上の注意	1～2ページ
体重計精度の保証について	2ページ
各部のなまえ	3ページ
ご使用の準備	4ページ
測定方法	5ページ
仕様	6ページ
おかしいな? と思ったら	7ページ
保証書規定と保証書	背表紙

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止する為、必ずお守り頂く事を、次の様に説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、下記の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示を無視して取り扱いを誤った場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して取り扱いを誤った場合、人が傷害を負う可能性または物的損傷の発生が想定される内容を示しています。



この表示は、してはいけない禁止内容を告げるものです。



この表示は、必ず守っていただく強制内容を告げるものです。



警告



風呂、シャワー室での使用禁止

- タイル面やぬれた床など、すべりやすい所では使用しないでください。転倒してケガをする恐れがあります。

禁止



本機の測定結果を基に、自己判断で減量などは絶対にしない

- 自己判断で減量などをせず、医師か専門家の指導を必ず受けてください。

必ず守る



本機の端に乗ったり、飛び乗る、跳ねるなど絶対にしない

- 本機が傾いたり倒れたりして、転倒によるケガの原因になります。また、本機に衝撃や振動を与えないでください。故障の原因になります。

禁止



本機に水をかけない

- 本機に水がかからないように注意してください。内部に水が入り故障の原因になります。また、濡れた体で乗らないでください。転倒や故障の原因になります。

禁止



体の不自由な方は一人で使わない

- 体の不自由な方は、必ず介護者の付き添いの上、ご使用ください。

必ず守る

注意



禁止

業務用(病院等での測定)には絶対に使用しない

●業務用として使用するための機能は備えていません。

※また、品物の売買取引の証明には使用しないでください。



必ず守る

電池の仕様表示に従って正しく使用する

●以下の事を守らないと電池の液もれ・発熱・破裂などの原因になります。

○電池の⊕⊖を正しくセットしてください。

○古い電池と新しい電池、異種の電池を混用しないでください。

○使い切った電池はすぐに本機から取り出してください。

○本機を長期間使用しない場合は、電池を取り出してください。

また、定期的に液もれなどがないか点検をしてください。



必ず守る

乳幼児の手の届かないところに保管使用する

●転倒したり、思わぬケガ・事故の原因になります。



禁止

分解禁止

●分解、修理をしないでください。また、絶対に改造などしないでください。

体重計精度の保証について

- 本機は、計量法に定められた技術基準で製造し、厳重な検査の上、出荷しております。本機の体重計精度は、下記の範囲を保証します。

計 量 範 囲	保証精度範囲
8 k g をこえて 7 5 k g まで	± 0 . 2 k g
7 5 k g をこえて 1 5 0 k g まで	± 0 . 3 k g




※本機の測定範囲は 8 k g ~ 1 5 0 k g までです。

測定範囲外の精度に関しましては保証対象外となります。

- 本製品は、ご家庭での測定用です。
業務用、品物の売買取引や、その他の目方を証明する場合などには使用できません。
また、各種団体等の健康診断でのご使用もおやめください。

各部のなまえ

● 本体名称

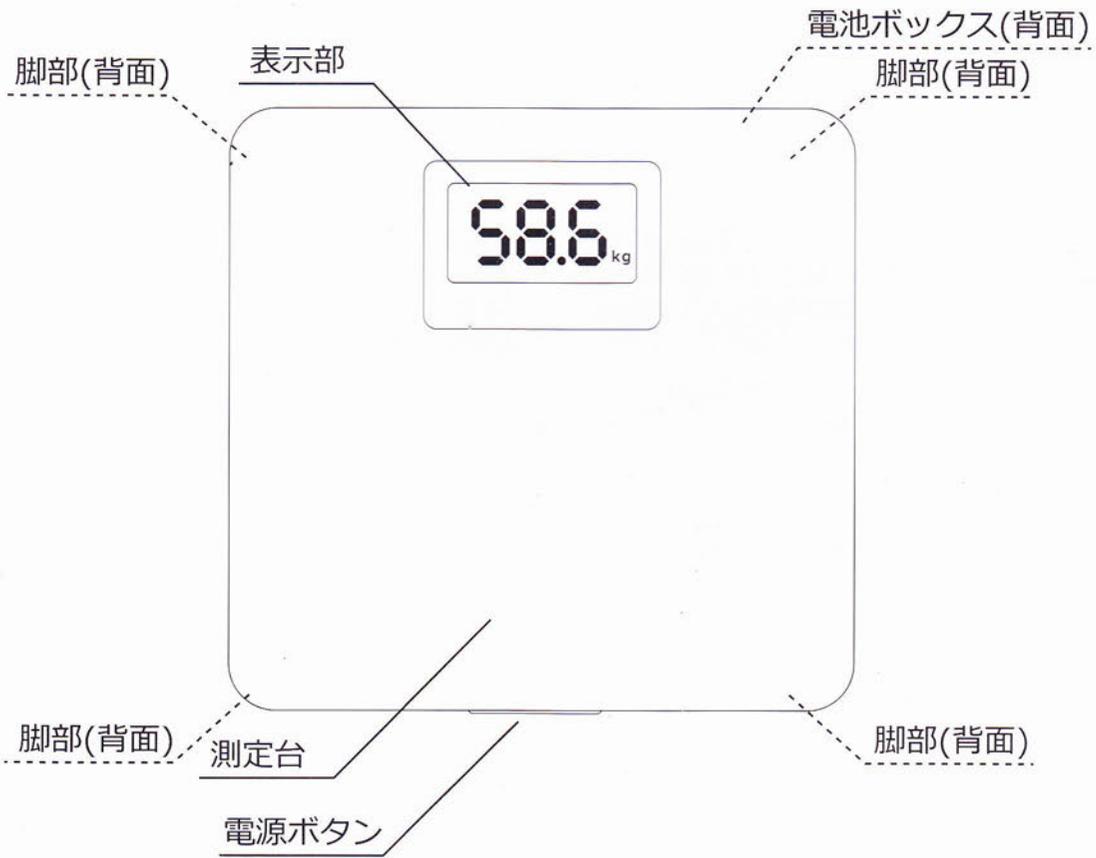

ご使用の準備

●乾電池の入れ方

使用電池：単4 アルカリ乾電池×4個（別売）

※初めてご使用になる際は、単4 アルカリ乾電池をセットして正常に動作することを確認してください

- ① 電池蓋を下図の矢印の方向に押しながら、電池蓋を外してください。



- ② 下記の向きに電池を1本ずつ挿入し、セットしてください。
このとき電池の極性を正しく入れてください。




- ③ ①と逆の手順で電池蓋をセットしてください。

⚠ 警告 電池の取扱いについて

- 万一、電池の液が目に入ったときは、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の診察・治療を受けてください。
- 万一、電池の液が皮膚や衣服についたときは、すぐに多量のきれいな水で洗い流してください。
- 電池の極性（+・-）を正しく入れてください。液漏れ、破裂、発熱などが発生し、ケガや故障の原因になります。
- 必ず指定の電池を使用し、同一ブランドの新品の電池と交換してください。（単4形乾電池×4個）また、長期間（80日以上）使用しない場合は、電池を取り外して保管してください。液漏れ、破裂などが発生し、ケガの原因になります。
- 電池交換の際は、4個全部を新品の同一ブランドの電池と交換してください。
- 電池を火中に入れたり、加熱、充電、水没しないでください。液漏れ、破裂の原因になります。
- 電池を廃棄する際はお住まいの地方自治体の指示に従ってください。

測定方法

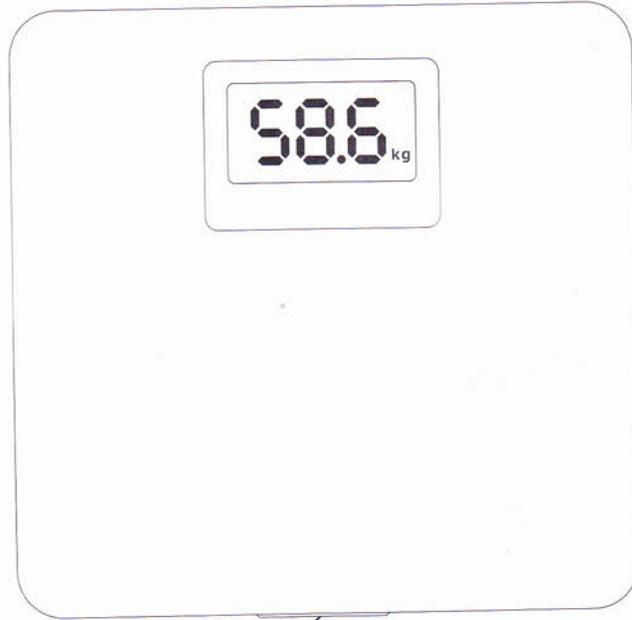

電源ボタン
(フットスイッチ)

- ①電源が消えている状態で「電源ボタン」を押すと電源が入ります。
- ②“0.0kg”が表示されたら、静かにのってください。
- ③測定結果が表示されます。
- ④約 30 秒後に電源が自動で切れます。
または、「電源ボタン」を押すと電源が切れます。

仕 様

製品名	デジタル体重計
表示画面	デジタル液晶表示
最大量(目量)	150kg
最小表示(目量)	0.1kg
入力電源	DC6.0V
使用電池	単4アルカリ乾電池×4本(別売)
電池寿命	約1年(室温20℃、1日4回測定時)
使用温度範囲	10~35℃
外形寸法	幅267×高26×奥行256mm
質量	約0.9kg
付属品	取扱説明書(保証書付き)

※本個装箱および取扱説明書に記載しているイラストは、イメージです。
※電池は別売になります。

おかしいな?・・・と思ったら

おかしいな? 故障かな?・・・と思う前に、ご確認ください。

●下記のような表示が出たら

表示 ● 症状	対処
Lo ●電池が 消耗しています。	●新しい電池に交換してください。
0-Lo ●体重が測定範囲を 超えています。	●体重150kgを超えた測定は できません。
Err ●正しく測定 できませんでした。	●以下のことを確認し、 もう一度測定してください。 硬く平らな面に 置かれていますか? 測定中に動いたり、 測定終了前に本機から 降りたりしていませんか?

それぞれをご確認いただき、取扱説明書通りに正しく扱っても上記の様な症状が発生した場合は
お買い上げの販売店にお申し出ください。

保証書規定と保証書

(無料修理規定)

- 取扱説明書の注意に従った使用状態で保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りまたは、自己修理、分解、調整、改造等による故障や損傷
 - (ロ) お買上げ後の輸送、移動、落下等による故障および損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障および損傷
 - (ニ) 消耗品の交換
 - (ホ) 本書の提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは文字を書きかえられた場合
 - (ト) 商品本来の用途以外または、業務用として使用された場合の故障や損傷
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

デジタル体重計

保証書

《持ち込み修理》

型番： YB-007WT	商品番号： 07-4400	★お買上げ日： 年 月 日	保証期間： 本体1年間
★お客様 お名前	ご住所（〒 - ）		電話（ ）
	様		

- 本保証書は、本保証書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には本保証書記載の内容にもとづき、お買上げの販売店が無料修理致します。商品と本保証書をご持参、ご提示のうえ、お買上げ販売店にご依頼ください。また、お買上げ日、販売店名など記入もれがありますと無効になります。必ずご確認いただき、記入のない場合はお買上げ販売店にお申し出ください。
- 本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お客様にご記入いただいた本保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- 本保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

★販売店	住所・店名・電話
	(印)

★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認の上お受け取りください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ

●フリーダイヤル（無料） ●携帯電話・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735

電話受付 平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00
日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ

電話受付 **048-992-3970** 平日 9:00~17:00
土・日・祝日及び年末年始は除きます