

## 充電式電動歯ブラシ

### 取扱説明書

HB-CY103R-W

品番:07-9849

この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。その後大切に保管し、必要な時にお読みください。

### 警告

電気製品は安全のため注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この説明書には、事故を未然に防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

なお、お読みになられた後は、ご使用時にいつでも見られるよう大切に保存してください。

### はじめに

■この商品は100ボルト仕様です。同様の商品を熟知されている方も、この取扱説明書をよく読んでご使用ください。安全に関する記述については、特に注意を払ってください。

■この商品は室内専用で作られています。

■本製品の安全を無効にするようなことはしないでください。

### 安全にお使いいただくために

電気製品は間違った使い方をすると火災や感電による人身事故につながる可能性があります。

このような事故を防ぐために、この取扱説明書をよくお読みになり注意事項を必ずお守りください。注意事項は、取り扱いを誤った場合に予想される事故の大きさによって二段階に表示しています。

**警告** この表示の注意事項を守らなかった場合、死亡または重症を負う可能性がある事を示しています。

**注意** この表示の注意事項を守らなかった場合、けがをしたり、物的損害を受けたりする可能性がある事を示しています。

⊘ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）が描かれています。

### 警告

！ 日本の家庭用電源で使う  
電源コードのプラグは、AC100V（50/60Hz）の家庭用コンセントにつないでください。海外などの異なる電源電圧で使用すると火災や感電の原因となります。

⊘ 電源コードやプラグを傷つけない  
電源コードの断線やプラグの損傷による火災や感電を防ぐために次のことをお守りください。  
・電源コードやプラグを加工したり、傷つけたりしない。  
・無理に曲げたり、ねじったり、重いものをのせたり、引っ張ったりしない。

・電源コードを抜くときは、コードを引っ張らずに必ずプラグを持って抜く。  
・商品に強くコードを巻きつけない。  
・延長コードを使用しない。

⊘ 濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない  
感電の原因となることがあります。

⊘ 絶対に改造・分解・修理しない  
本品を分解したり改造しないこと。また、落としたり曲げたり強い衝撃を与えないでください。発火や異常動作によるけがの恐れがあります。

⊘ 浴室やシャワー室では使用しない  
入浴中のご使用は絶対避ける  
本品は入浴中での使用は避けブラシ部分以外を水につけたりしないでください。  
また、充電器は浴室やシャワー室など、湿度の高いところや水はねのある場所での設置はしない。（火災や感電の危険があります。）  
・浴槽や洗面用シンク等に落ちたり浸ったりしやすい場所に、置いたり保管したりしない。  
・水やその他の液体に触れたり浸ったりしやすい場所に、置いたり落したりしない。

！ 幼児の手の届かない所に保管  
幼児の手の届かない所に保管する。

⊘ 本来の目的以外には使用しない  
お子様のおもちゃとして使用するなど本来の目的以外には使用しない。

！ 次のような症状が見つかったら  
・異常なおいや煙がでている。  
・内部に水や異物が入った。

・本機を落としたり破損した。  
・正常に動作しない。  
・電源コードやプラグに傷がある。

お買い上げの販売店、または、弊社お客様相談室に修理をご依頼ください。

### 注意

▲ブラシを強く押し当て、ゴシゴシすることはおやめください。歯や歯ぐきを傷めます。

▲歯や歯ぐきの病気にかかっている方や治療中の方は、医師に相談の上ご使用ください。

▲ブラシ部分に衝撃や無理な力を加えないでください。  
▲変形・変質の恐れがありますので塩素系殺菌剤・漂白剤や熱湯にはつけないでください。


### 主な仕様

電動歯ブラシ	使用電池	ニッケル水素電池（内蔵）
	充電時間	約12時間（連続使用可能時間 約30分）
	寸法	約215×28×33mm
	質量	約100g
	振動数	約8200回/分（無負荷時）
	材質	本体：ABS樹脂 ブラシ部：ナイロン樹脂 （ブラシのかたさ：ふつう）

充電器	充電方式	無接点充電方式
	入力電源	AC100V 50-60khz
	出力	DC2.4V 600mA
	寸法	約40×60×90mm
	質量	約128g
	使用温度範囲	0~40℃
	コードの長さ	1.2m

## ご使用方法

### ＜各部の名称＞

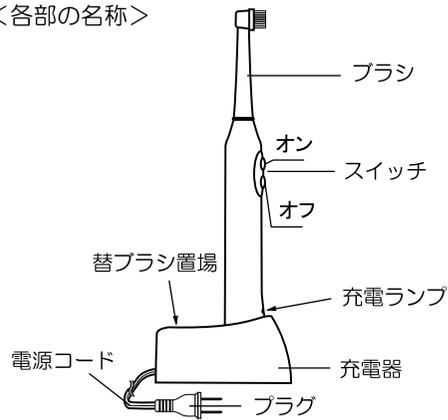


### ＜充電のしかた＞

1. 充電器のプラグをAC100Vのコンセントに差し込みます。
2. 電動歯ブラシを（スイッチオフの状態）充電器に立てかけます。  
※グリーンの充電ランプが点灯します。  
※フル充電（最長約12時間）した場合、約30分連続使用が可能です。

**!** 12時間充電式です。フル充電後も充電ランプは消えません。  
(過充電防止装置により過充電はされませんが、念のため規定の充電時間終了後は充電器のプラグをお抜きください。)


### ＜使用方法＞

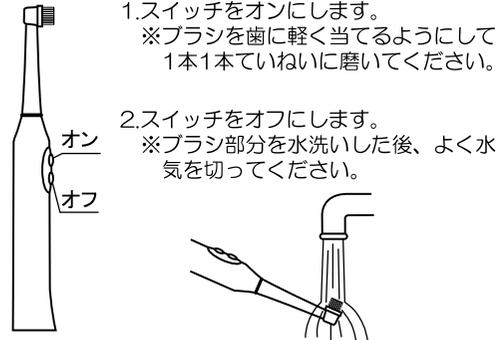

1. スイッチをオンにします。  
※ブラシを歯に軽く当てるようにして1本1本ていねいに磨いてください。
2. スイッチをオフにします。  
※ブラシ部分を水洗いした後、よく水気を切ってください。

- ▲本品はブラシ部分だけを水につけて洗ってください。本体は、なるべく水のかからないようにして水にぬれた場合は軽くふき取ってください。
3. 使い終わったら充電器に立てかけてください。

## ブラシの交換方法

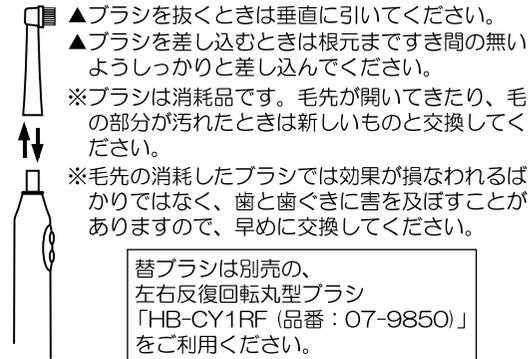

替ブラシは別売の、  
左右反復回転丸型ブラシ  
「HB-CY1RF (品番：07-9850)」  
をご利用ください。

## お手入れ方法

本機を正しく長くご使用いただくために、以下の事項を守ってお手入れください。

- クリーニングする前には、本品のスイッチをオフにして、ACコンセントからコードを抜いてから行ってください。
- 本品の外側をきれいにするためには、少し湿った布で拭いてから、乾いた布で拭いてください。  
ベンジン・シンナー・アルコールなどの使用は避けてください。(印刷のほげや変色・溶けなどの恐れがあります。)  
※ブラシは汚れたら交換してください。



- 化学薬品、整髪剤、トイレ用洗剤などが付かないようにしてください。プラスチックがダメージを受けることがあります。
- 電源コードを長く使うためには、注意して扱ってください。コードがねじれた場合は、注意深くまっすぐに伸ばしてください。ACコンセントから抜くときは、プラグを持って抜いてください。決してコードを持って抜かないでください。

**OHM** 株式会社 オーム電機  
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8  
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは **お客様相談室** へ  
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは  
**0120-963-006 048-992-2735**  
電話 平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00  
受付 ※日曜・祝日及び年末年始は除きます