


ご使用方法



1. スイッチをオンにします。
※ブラシを歯に軽く当てるようにして1本1本ていねいに磨いてください。

2. スイッチをオフにします。
※ブラシ部分を水洗いした後、よく水気を切ってください。

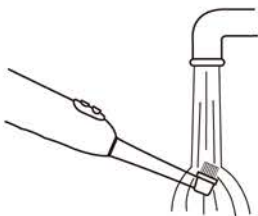

- ▲ ブラシ部分だけを水につけて洗ってください。本体は、水のかからないようにして水にぬれた場合は軽くふき取ってください。

ブラシの交換方法



- ▲ ブラシを抜くときは垂直に引いてください。

- ▲ ブラシを差し込むときは根元まですき間の無いようしっかりと差し込んでください。



- ※ ブラシは消耗品です。毛先が開いてきたり、毛の部分が汚れたときは新しいものと交換してください。

- ※ 毛先の消耗したブラシでは効果が損なわれるばかりではなく、歯と歯ぐきに害を及ぼすことがありますので、早めに交換してください。

替ブラシは別売の、
左右反復回転丸型ブラシ
「HB-CY1RF-P(品番：07-9889)」
又は
「HB-CY1RF(品番：07-9850)」
をご利用ください。