

故障かな?と思ったら

最初に下記の内容を確認してください。

1. 電源ボタンを押しても電源が入らない。

ACアダプターが抜けていないか確認してください。

ACアダプターにコンセントを差し込んでもう一度操作してください。

2. 運転中に停止した。

電源ボタンを押してから設定した時間が経過すると、自動的に運転が停止します。

製品仕様

商品名	ハンドリラク
型番	HM-MFAA-W
電源	DC5V 2A (専用ACアダプター付属)
定格消費電力	7W (内ヒーター3W)
タイマー	約15分・約10分・約5分
本体寸法	約W174×L284×H112mm
ケーブル長	約1.5m
本体質量	約880g
付属品	専用ACアダプター (ZD12D050200JP) 入力:100-240V~ 50/60Hz 0.5A 出力:5V== 2000mA 保証書付取扱説明書 (本書)

切り取り線

保証書（持込修理）			
商品名	ハンドリラク	★お買い上げ日	年月日
型番	HM-MFAA-W	品番	08-0324 保証期間:本体1年間(お買い上げの日から)
ふりがな			
★お名前 様			
お客様	★ご住所(〒 -)		
	電話	()	
販売店	★住所	店名	電話
			印

(注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご記入ください。

※この保証書は、本書の明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理について不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

HM-MFAA-W

ハンドリラク

保証書付取扱説明書 保管用

このたびは、弊社のハンドリラクをお買いあげいただき、まことにありがとうございました。

ご使用になる前に、本取扱説明書をお読みになり正しくご使用ください。お読みになったあとは、大切に保管してください。

ご使用になる前に 安全上のご注意^{<必ずお守りください>}

下記の記載事項は、お使いになる人およびまわりの人への危害や物的損害を未然に防止するための重要な内容です。必ずお守りください。

!警告 正しく取り扱われなかった場合、人が死亡または重傷を負うことが想定される事項を示しています。	
禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●他の治療器と一緒に使用しない。 ●手以外には使用しない。 ●同時に複数の人が使用しない。 ●熱すぎると感じた場合は使用を中止する。 またこたつの中やストーブなどの暖房器具の近くでの使用はしない。 ※低い温度でも長時間皮膚の同じ場所に触れていると低温やけどのおそれがあります。 ●アクセサリーなど硬いものをつけて使用しない。 ●電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。 ●電源コードが傷んだときは使用しない。
必須	<ul style="list-style-type: none"> ●医師からマッサージを禁じられている人 例 血栓症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症などの治療を受けている人 ●悪性腫瘍のある人 ●皮膚に外傷のある人 ●心臓に障害のある人 ●妊娠している人および産後直後の人は ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害からくる知覚障害のある人 ●皮膚に創傷のある人 ●安静を必要とする人 ●体温38℃以上(有熱期)の人 ●骨粗しょう症の人および脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど急性疾患の人 ●脊椎に異常のある人または背骨が左右に曲がっている人 ●その他、医療機関で治療中の人は
必須	<ul style="list-style-type: none"> ●故障を発見したときはすぐに使用を中止して電源を切る。 ●お手入れの際は必ずACアダプターをコンセントから抜く。 また濡れた手で抜き差ししない。


!**注意** 正しく取り扱われなかった場合、人が障害を負うことまたは物的損害が発生することが想定される事項を示しています。

<ul style="list-style-type: none"> ●病院や接骨院など業務用には使用しない。本機は業務用としての機能は備えていません。 ●修理・分解・改造をしない。特に機器が故障した際は、勝手に修理などせずに、販売店または弊社お客様相談室に連絡する。 <p>【使用前のご注意】</p> <ul style="list-style-type: none"> ●本体に破損やひび割れがないこと、手の差込口の縫製破れがないことを確認する。 ●使用前に正常に動作するか確認してから使用する。 ●本製品をしばらく使用しなかった後で使用する場合は、機器が正常にかつ安全に動作することを確認してから使用する。 <p>【使用中のご注意】</p> <ul style="list-style-type: none"> ●15分以上の連続した使用は避ける。 ●初めてご使用になるときは、強さを「弱」に、タイマーを5分に設定する。慣れるまでは強さを「弱」のままで使用する。 ●機器に故障が発見された場合には、使用を直ちに中止し、電源を切る。 ●身体に異常を感じたときは、使用を直ちに中止する。 ●浴室など湿気の多い場所では使用しない。また、水などの液体がかからないようにする。 ●落下など強い衝撃を与えない。 <p>【使用後および保管時のご注意】</p> <ul style="list-style-type: none"> ●小さなお子様、乳幼児の手の届かないところに保管する。 ●長期間使用しない場合は、衛生的に保ち湿気が少なく極端な高温・低温にならない場所に保管する。 	<ul style="list-style-type: none"> ●屋外で使用しない。本製品は屋内専用です。 ●小さなお子様や乳幼児には使用させない。また、本体の上に乗って遊んだり、本体に乗ったりしない。 ●火気・熱気の近く、エアコンの風が直接あたるところ、直射日光のあたるところでは使用しない。 ●使用中は眠らない。 ●布団の中や、毛布などをかぶせて使用しない。 ●平らな場所に置いて使用する。 ●コンセントから抜くときは、ケーブルを持たずに必ず先端のアダプターを持って引き抜く。 ●使用後はACアダプターをコンセントから抜いておく。 ●ACアダプターは指定された付属のものを使用する。また、付属のアダプターはほかの商品には使用しない。 ●両手を入れて使用しない。本製品は片手専用です。
---	--

お手入れおよび廃棄時の注意

<ul style="list-style-type: none"> ○お手入れをする際は、水または中性洗剤を柔らかい布に含ませて、かたく絞ってからやさしく拭いてください。 その後、乾いた柔らかい布で拭いてください。※シンナー・ベンジン・アルコール・クリーナーなどは絶対に使用しないでください。 ○本製品を廃棄する際は、お住まいの自治体の指示に従って廃棄してください。

各部の名称

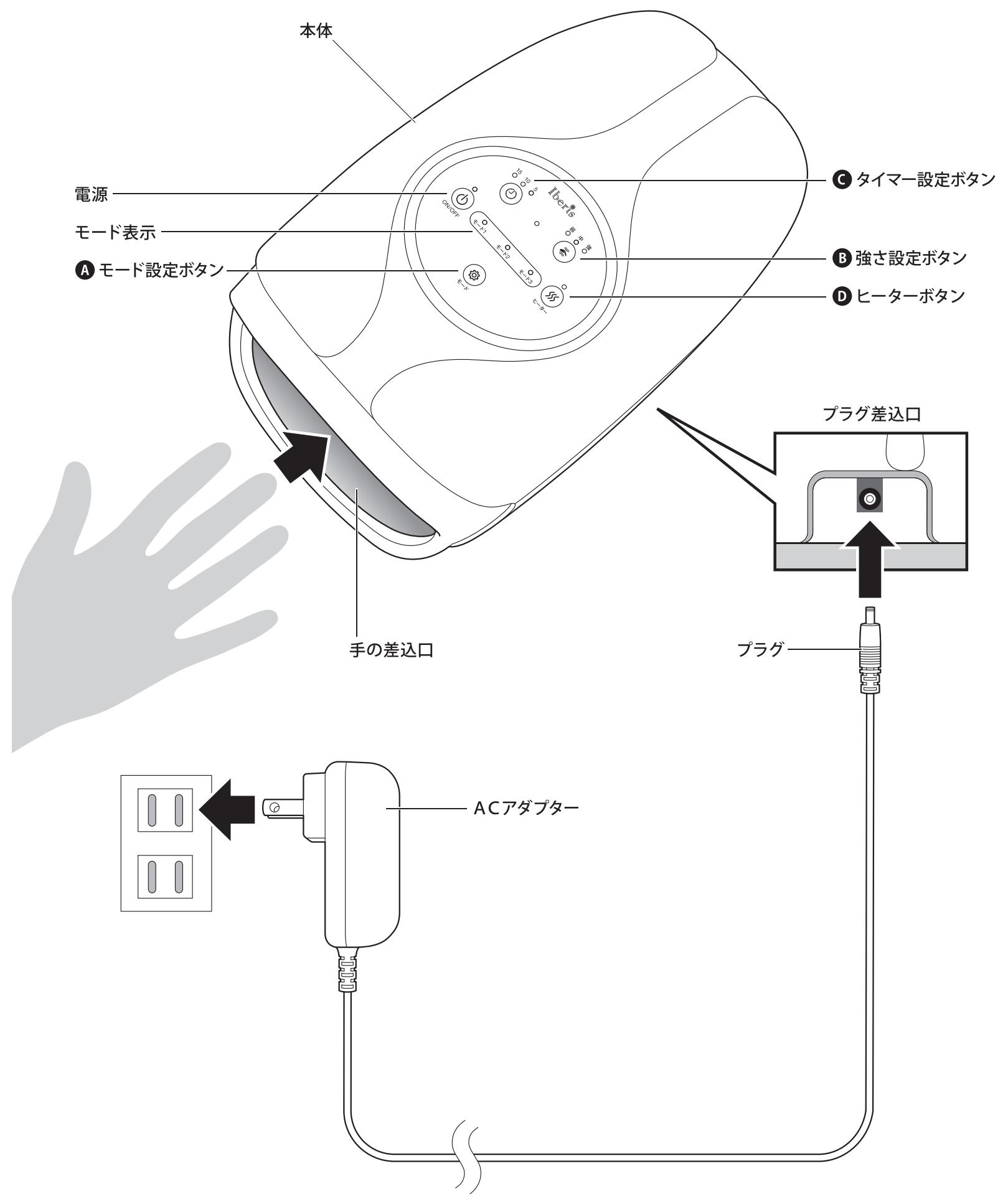

操作方法・使用上のご注意

使用前

- いつも本体を清潔にしてください。
- 使用前に手の差込口に縫製破れがないか確認してください。
- 使用前に操作ボタンや、タイマーが正常に動作するか確認してください。
- プラグを本体のプラグ差込口につないでください。
- ACアダプターをコンセントに正しく差し込んでください。
- 手の差込口に手を奥までしっかりと差し込み電源をONにしてください。

使用上のご注意

- ⚠ 初めてご使用になるときは、強さを「弱」に、タイマーを5分に設定してください。
- ⚠ 故障などで電源を切ってもエアが抜けないときは、本体裏のエア排出カバーを左に90度回して矢印をOFFからONに合わせてください。エアを抜くことができます。

操作方法

A モードを選ぶ

モード設定ボタンを押すことで、モードの調整ができます。スタート時は「モード1」で動作します。
モード設定ボタンを押すたびに、「モード2」→「モード3」→「モード1」→「モード2」の順に切り替わります。
「モード1」：手のひらと指同じ割合でプレスします。
「モード2」：指を重点的にプレスします。
「モード3」：手のひらを重点的にプレスします。

B 強さを選ぶ

強さ設定ボタンを押すことで、エアでプレスする強さの調整ができます。スタート時は「弱」で動作します。
強さ設定ボタンを押すたびに、「中」→「強」→「弱」→「中」の順に切り替わります。

C タイマーを使用する

タイマー設定ボタンを押すことで、タイマーの時間を調整できます。スタート時は「15分」で動作します。
タイマー設定ボタンを押すたびに、「10分」→「5分」→「15分」→「10分」の順に切り替わります。

D ヒーターを使用する

ヒーターボタンを押すことで、ヒーターを使用できます。スタート時は「OFF」で動作します。

使用後

- 電源を切る。
- 手を本体から抜く。
- ACアダプターをコンセントから抜いてからプラグを抜きます。
- 汚れをふき取り、清潔にする。
- 高温多湿の場所を避け、室温で保管します。

切り取り線

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷
 - (二) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書き換えられた場合
(但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります。)
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ