

保証書

持込修理 無料修理規定

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
 - 2.保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
 - (ニ) 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合（但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります）
 - (ト) 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ) 一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
- 3.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
 - 4.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
 - 5.本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

商品名 充電式音波歯ブラシ		★お買い上げ日： 年 月 日	
型番	HB-S04JA-W	品番	08-5087
保証期間：本体1年間(お買い上げの日から)			
お客様	フリガナ ★お名前	様	
	★ご住所 〒	—	
		電話	()
修理メモ			
販売店	★住所 店名 電話		
	®		

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<https://www.ohm-electric.co.jp>


製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ	
●通話料無料	●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735	
電話受付	平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます
修理に関するご相談は 修理ご相談センター へ	
電話受付	048-992-3970 平日 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

iberis

充電式音波歯ブラシ

保証書付 取扱説明書

型番/品番
HB-S04JA-W/08-5087

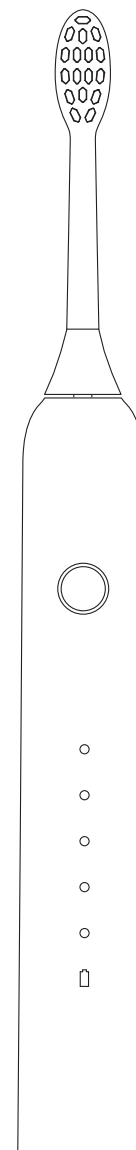



このたびは弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をお読みのうえ、正しく安全にお使いください。この取扱説明書は、ご使用時にいつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。

安全上のご注意



必ずお読みください




ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、記載事項をお守りいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。



●表示について:表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。




	警告 この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
	注意 この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

●お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。(下記は図記号の一部です)

	禁止 この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。
	指示 この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

 警告		
 必ず守る	<p>複数の人で共有しない 病原菌に感染する原因になります。</p> <p>お子様の手の届くところに保管しない。また、お子様に単独で使用させない。 思わぬけがを負うおそれがあります。</p> <p>USBプラグを抜くときは、USBケーブルを持たず、プラグを持って抜く。 感電やショートなどによる発火の原因になります。</p> <p>使用中、USBプラグやUSBケーブルが異常に熱くなったり、本体から煙や異常なおいが出るようなときは、直ちに使用を中止し、弊社お客様相談室にご相談ください。 傷んだプラグやケーブルは、絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。</p> <p>USBプラグなどのホコリは定期的に取り除く。 湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。</p> <p>お手入れは、必ず電源が切れた状態で行なう。 思わぬけがを負うおそれがあります。</p>	 禁止
	<p>火の中に投げ込まない。 本製品には充電式電池が内蔵されています。高温になった場合は過熱、火災、爆発の原因になります。</p> <p>USBプラグやUSBケーブルを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない。 火災や感電の原因になります。 傷んだプラグやケーブルは、絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。プラグやケーブルが破損したときは直ちに使用を中止し、弊社お客様相談室にご相談ください。</p> <p>USBプラグは根元まで確実に差し込み、傷んだUSBプラグ、USBケーブルは使用しない。 火災や感電の原因になります。</p> <p>ぬれた手でUSBプラグを抜き差ししない。 感電やけがの原因になります。</p> <p>持ち運び時や収納時にUSBケーブルを引っ張らない。 ケーブルが断線して、ショートなどによる感電や火災の原因になります。</p>	

 禁止	<p>異常時(こげ臭い、発煙など)はUSBプラグを抜き、使用を停止する。 火災や感電の原因になります。</p> <p>本体のすき間にピンや針金などの金属物や異物を入れない。 内部に触れ、感電やけがなどの原因になります。</p> <p>発熱器具の近くに置かない。 樹脂部分が溶けて引火の原因になります。</p>	 分解禁止
	<p>本体を分解、修理、改造しない 感電の原因になります。</p>	


 注意		
 必ず守る	<p>周囲の人の不意の動作に気を付ける。 接触によりけがをするおそれがあります。</p> <p>重度の歯周病がある、または歯を治療中の方は注意して使用する。不快感のある方は使用前に歯科医に相談する。 歯や歯ぐきを傷つけるおそれがあります。</p> <p>使用時にかゆみ、赤み、じんましんが発生した場合、またはアレルギー症状がある場合はすぐに使用を中止し、歯科医に相談する。 症状が悪化するおそれがあります。</p>	 禁止
	<p>本体やブラシのプラスチック部分を歯や歯ぐきに接触させない。 歯や歯ぐきを傷つけるおそれがあります。</p> <p>歯磨き以外の目的に使用しない。 事故やトラブルの原因になります。</p> <p>人以外に使用しない。 事故やトラブルの原因になります。</p> <p>自分で意思表示ができない人に使用しない。 事故やトラブルの原因になります。</p> <p>お手入れの際、シンナーやベンジン、アルコールは絶対に使用しない。また、化粧品やハンドクリームなど、油成分の付いた手で使用しない。 故障・変形・変色の原因になります。</p> <p>本製品を落としたり、強い衝撃を与えない。 火災や故障のおそれがあります。</p>	
	<p>研磨剤を多く含む歯磨き粉(ヤニの汚れを取り除くために使用される歯磨き粉や、ホワイトニング歯磨き粉など)を使用しない。 歯や歯ぐきを傷つけるおそれがあります。</p> <p>ブラシを歯や歯ぐきに強く押しあてたり、長時間ブラシをかけない。 歯や歯ぐきを傷つけるおそれがあります。</p>	

充電式リチウムイオン電池について
<ul style="list-style-type: none"> ●絶対に交換しないでください。誤って交換すると爆発する危険があります。 ●充電式リチウムイオン電池は消耗品であり、正常に使用した場合でも経年により劣化します。 ●充電式電池はリサイクルできます。廃棄については各自自治体にご相談ください。


防水保護等級について
<p>本製品はJIS C0920:2003 (IEC 60529:2001) による水の侵入に対する保護等級「IPX7」(一定の水圧で一定時間水中に浸かっても有害な影響がない)仕様となっておりますが、以下の点にご注意ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●水がかかる場所や湿気の多い場所で使用するときは、必ずUSBポートカバーがしっかり閉まっていることを確認してください。 ●長時間、水道水やシャワーなどの噴流に当てないでください。浸水する可能性があります。 ●石けんの泡やオイルのついた手でさわらないでください。浸水する可能性があります。 ●ドライヤーなどで乾かさないうでください。密閉部が変形する可能性があります。 ●水の侵入による故障につきましては、保証期間内でも有料修理となります。

各部の名称

本体

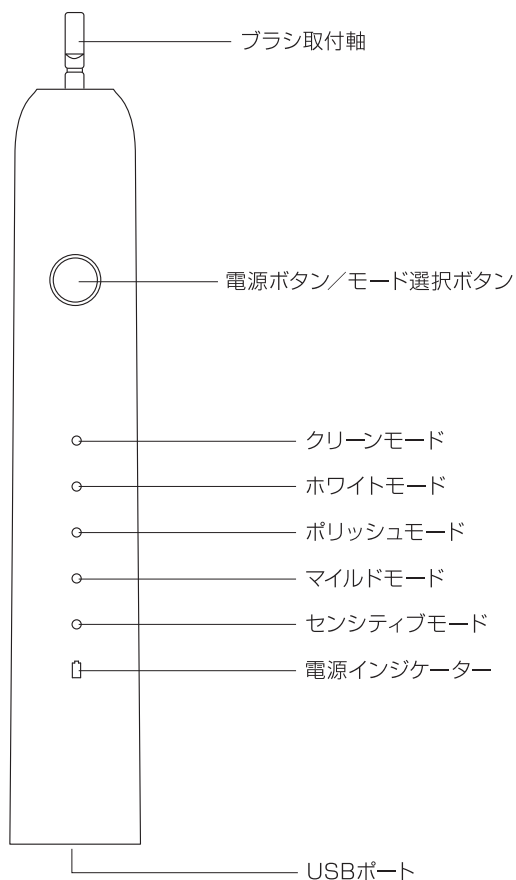


付属品

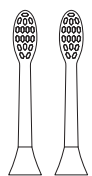

専用ブラシ
×2本

Type-A Type-C

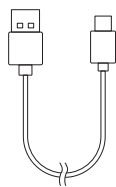

専用充電USBケーブル

■ ブラシの交換について


ブラシの交換目安は3ヶ月ごとです。3ヶ月未満であっても、毛先が広がってきた場合は効果的にブラッシングできないため、必要に応じて交換してください。

専用交換ブラシ (別売)


型番：HB-5090 品番：08-5090

充電のしかた


1、本体底部のUSBポートカバーを開けます。

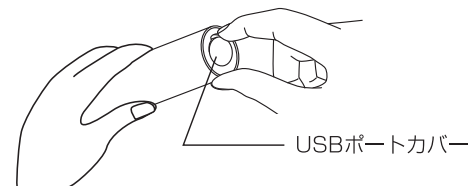

2、付属の充電USBケーブルのプラグ (Type-C側) をUSBポートに接続します。

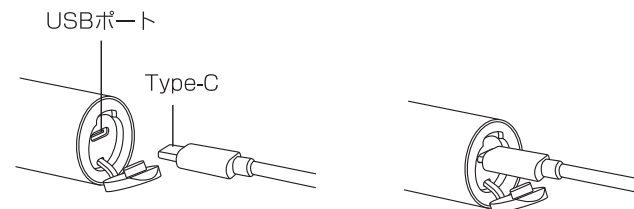

3、充電USBケーブルのプラグ (Type-A側) を市販のUSB対応ACアダプター (5V/1A以上) に接続し、給電します。

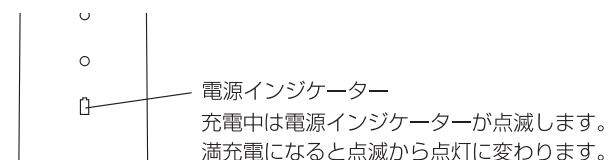

4、充電後は必ず充電USBケーブルを本体から取り外し、USBポートカバーを閉じてください。

⚠ 注意


- USBケーブルは必ず付属の専用USBケーブルをお使いください。
- 初めてご使用になるとき、長期間ご使用にならなかったときは、電池が自己放電し、動かないことがあります。必ず充電してからお使いください。
- 初めてご使用になるとき、長期間ご使用にならなかったときは、充電の開始後すぐに充電のインジケータが点灯しない場合がありますが、充電を続けているうちに数分で点灯します。
- 推奨される充電環境温度は5～35℃です。室温が上回ったり下回ったりするとバッテリーが正常に充電されない場合や、まったく充電ができないことがありますのでご注意ください。
- 充電の際に本体やUSBケーブルが熱くなることがありますが、故障ではありません。
- 充電しながらのご使用はできません。故障の原因になります。
- PD充電 (急速充電) はできません。

使用方法

1、専用ブラシをブラシ取付軸に取り付けてください。


本体の前面とブラシ前面を合わせ、まっすぐに差し込んでください。

ブラシと本体の間にすき間がありますが、これは可動域を広げるために必要なすき間であり、故障ではありません。

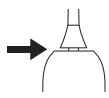

※ブラシを強くひねって取り付けしないでください。ブラシと本体が破損するおそれがあります。

※外力を受けるとブラシ取付軸が動きます。これは動作に必要な反応で、誤作動ではありません。

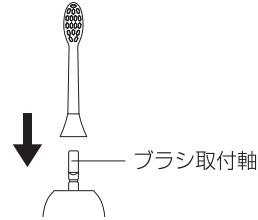

2、歯磨き粉を付けてブラシを口に入れてから、電源ボタン／モード選択ボタンを押して電源を入れてください。

※歯磨き粉や水しぶきの飛散を避けるため、歯ブラシを口に入れてから電源を入れてください。

※周囲温度が約5℃以下の場合、ブラシが作動しない場合があります。

※ブラシを強く押しつけ過ぎると、ブラシの振動が弱まり、異音が発生する場合があります。

3、電源ボタン／モード選択ボタンを押してお好みのモードを選んでください。

電源ボタン／モード選択ボタンを押すごとにモードが切り替わり、それぞれのランプが点灯します。

○クリーンモード

細かな振動で、歯面や歯周ポケットの汚れに届く。

○ホワイトモード

歯についた汚れを除去するために。

○ポリッシュモード


歯を磨きあげ光沢を与える。

○マイルドモード

やさしい磨き感を好まれる時に。初めてご使用になる方におすすめです。

○センシティブモード

敏感な歯と歯ぐきのために、やさしく磨き上げたい時に。

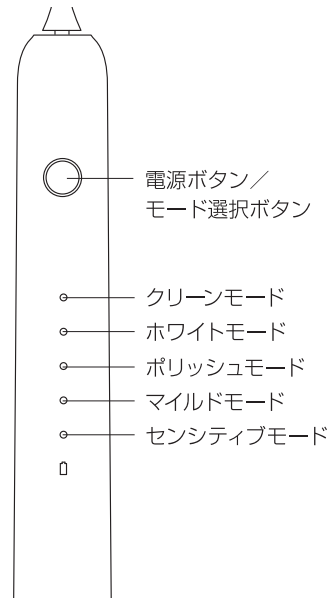

モードメモリー機能

最後に使用したモードが記憶されます。

電源を入ると、前回使用したモードで動作し始めます。

4、電源ボタン／モード選択ボタンを長押しして電源を切ってください。


※唾液が飛び散らないように、動作が止まってから口から出してください。

上手な磨き方

ブラシは毛先が歯に軽く触れる程度に当ててください。速く動かしたり、大きく動かしたりせず、歯1～2本ごとに丁寧に当ててください。

歯面や噛み合わせ面

歯に対して90°の角度で当てます。

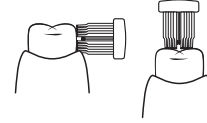

歯と歯ぐきの境目

毛先が境目に入りやすいよう45°の角度で当てます。



前歯の裏

歯ブラシを立て、1本ずつ丁寧に当てます。



■ブラッシングの例


右図のように、口腔内を上下左右4エリアに分け、それぞれを①～③の順に磨いてください。

上下左右1エリアにつき約30秒目安、全体で約2分目安です。

①歯の表側

②噛み合わせ面

③歯の裏側

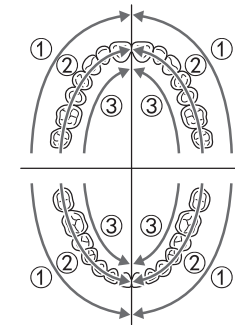

■ブラッシングの推奨時間

1エリアごとに内側から外側まで約30秒間優しく歯にブラシを当てて磨いてください(合計約2分)。各エリアでのブラッシングの時間をキープしながら、歯を均等に磨いていきます。磨き残しがなく、まんべんなく磨けていることを確認しながら行ってください。

約30秒のブラッシングリマインダータイマー機能

最約30秒ごとに1回自動的に一時停止して、1エリアあたりの適切な歯磨き時間をお知らせします。


お手入れの仕方

使用後は清潔に保つために清掃してください。

- 必ず電源が切れた状態で行なってください。
- 歯ブラシの洗浄に洗剤を使用する場合は、キッチン用の中性洗剤を使用してください。
- シンナーやベンジン、アルコールは使用しないでください。ひび割れや変形、変色のおそれがあります。

1、ブラシを取り外してください。

本体からブラシをまっすぐ取り外してください。

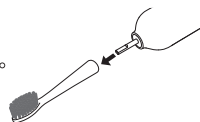

2、ブラシを水洗いしてください。

ブラシ部の内側と下部の汚れを完全に洗い流してください。

※ブラシを引っ張らないでください。毛が抜け落ちる場合があります。

※80℃以上のお湯を使用しないでください。ブラシ部が破損するおそれがあります。

※爪など鋭利な物は使用しないでください。



3、本体を水洗いしてください。

※防水ゴムを硬いもので傷つけないでください。

※電源ボタンやUSBポート部に水が掛からないようにしてください。防水加工がされていない内部に水が入るおそれがあります。

※40℃以上のお湯を使用しないでください。本体が破損するおそれがあります。



防水ゴム

4、ブラシと本体の水分をふき取り、十分に乾かしてください。

※ぬれている状態で充電しないでください。感電や火災を引き起こすおそれがあります。

よくあるご質問

Q.長期間使用しないと電池は劣化しますか？

A.劣化する場合があるため、3ヶ月以上使用しない場合は、3ヶ月に一度はフル充電をしてください。

故障かな？と思ったら

症状	考えられる原因	対処法
振動が弱い	バッテリー不足	充電をしてください。
電源を入れてもすぐに止まってしまう	バッテリー不足	充電をしてください。
電源を入れてもブラシが動かない	バッテリー不足	充電をしてください。
	電源ボタンが押されていない	電源ボタンをしっかりと押して電源を入れてください。
電源インジケーターが点灯しない	購入したばかり、または長期間使用していない	充電を続けているうちに数分後に点灯します。しばらくしても点灯しない場合は販売店、または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
充電した後も起動するまでに数分かかる	充電時間が足りない	取扱説明書に記載の充電時間に合わせて充電してください。
	電池の寿命	お住いの地域の廃棄方法に従って廃棄してください。
ボタンを操作しても電源インジケーターが反応しない	電池の寿命	お住いの地域の廃棄方法に従って廃棄してください。

仕 様

商 品 名	充電式音波歯ブラシ
電 源	DC5V/1A
内蔵バッテリー	充電式リチウムイオン電池 DC3.7V/2000mAh (交換不可)
充 電 時 間	約4時間 (5~35℃)
使 用 時 間	約70日間 (1日2回使用、1回2分)* ¹
防 水 性 能	IPX7 JIS/IEC保護等級 (JIS0920:2003)* ²
外 形 寸 法	(約)径30mm×長さ250mm
質 量	約119g
付 属 品	専用ブラシ……………2本 専用充電USBケーブル……………1本 保証書付取扱説明書……………1部
注 意 事 項	ACアダプターは別売りです。 DC5V/1A以上のものを使用してください。

*¹ 使用時間はあくまで目安であり、使用環境・使用頻度などにより異なります。

*² IPX7 (防浸形) : 一時的 (30分) に一定水深 (1m) の条件に水没しても内部に浸水しない。

*仕様および外観は改善のため、予告なく変更することがあります。